


AON

Implants

All or Nothing

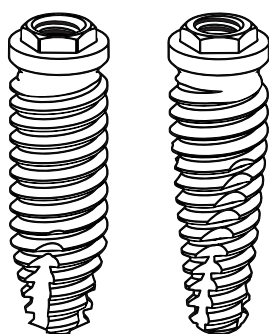

Catalogo Impianti
Esagono Esterno



L'azienda

Dal 2005 AoN Implants porta nel mercato medicale ed implantologico tutta l'esperienza ed il pregio della produzione Made in Italy, avendo la capacità di ascoltare il mercato con spirito attento, pragmatico, visionario.

AoN, acronimo di "All or Nothing", nasce con l'idea di affermarsi come punto di riferimento cardine nel mondo dell'implantologia, evolvendo prodotti e concetti canonici, offrendo ad implantologi e chirurghi odontoiatri soluzioni a tutto tondo.

Gli obiettivi

Il nostro focus primario è l'operatore di settore (odontoiatra, chirurgo, tecnico di laboratorio) con il quale lavoriamo a stretto contatto, direttamente sul campo.

I nostri prodotti sono il frutto di un attento ascolto di chi giornalmente affronta i più disparati casi con i propri pazienti.

Questo ci ha permesso di acquisire un know-how di altissima qualità ed esprimerci operativamente con soluzioni all'avanguardia, risolvendo molte delle problematiche tecniche da sempre sofferte e condivise dagli operatori.


Un focus che resterà sempre centrato sugli obiettivi dei professionisti del settore odontoiatrico!

Qualità e Sicurezza

Tutti i prodotti realizzati da AoN Implants sono sottoposti a rigorosi processi di verifica e controllo qualità, ed hanno ottenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001
ISO 13485



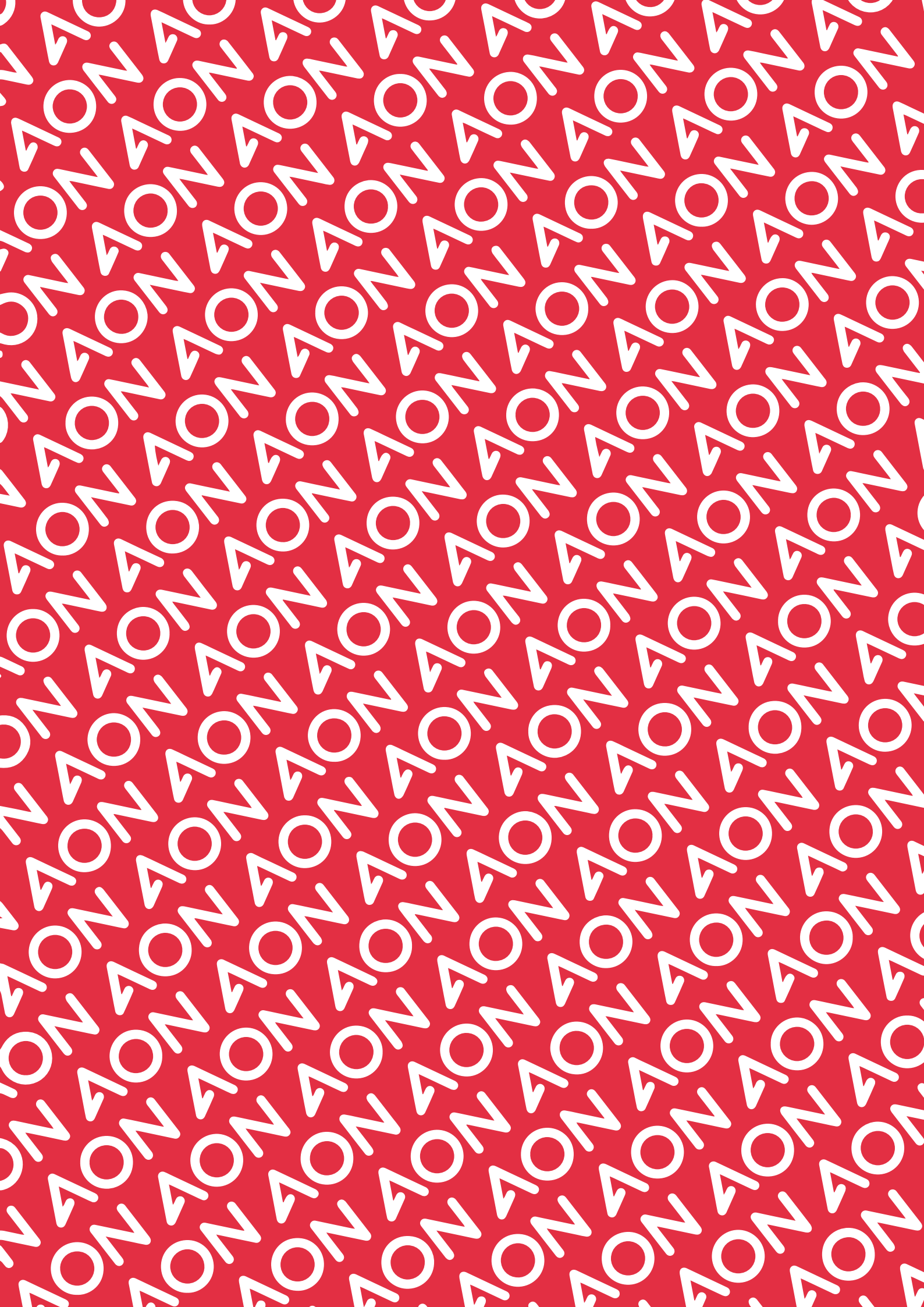


Indice dei contenuti



INTRODUZIONE

6

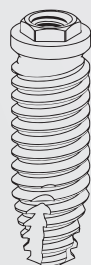

SISTEMI IMPLANTARI

8

Materiali e superficie

9

Impianto IS-FIVE

10

Protocollo IS-FIVE

11

Impianto IS-FOUR

12



OPZIONI PROTESICHE

24

Generale

25

Provvisoria

27

Zirconia

27

T-BASE

28

3POD

28

Cementata


29

Avvitata

30

Overdenture

31

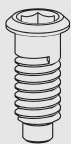


RICAMBI E LABORATORIO

Ricambi	32
---------	----



KIT E STRUMENTI

Kit chirurgico Standard	35
Configurazione kit IS-5	36
Configurazione Kit IS-4	37
Configurazione Kit Cyroth	38
Frese	39
Stop	39
Mounter	40
Chiavi di fissaggio	40
Chiavi MUA	40
Strumenti	41

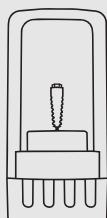

GUIDA CONFEZIONI

Packaging	43
Apertura blister	44



INFO ED AVVERTENZE

46

I nostri Sistemi Implantari

Gli impianti dentali AON ad esagono interno sono progettati per affrontare tutti i casi di implantologia con estrema versatilità e sicurezza. La connessione performante assicura un accoppiamento protesico sempre preciso e stabile.

Il particolare trattamento superficiale, abbinato allo studio del design del corpo degli impianti, permette un'ottima osteointegrazione.



L'ampia gamma di componenti protesiche permette all'operatore di affrontare tutte le tecniche riabilitative più diffuse e performanti.

Per semplificare ulteriormente la gestione, le componenti presentano colorazioni e simbologie che aiutano ad identificarne le misure e caratteristiche.



Sistemi Implantari



Gli impianti dentali AoN Implants sono viti endosseee progettate e dimensionate per tutte le applicazioni nel settore della chirurgia odontoiatrica. Possono essere applicate in siti preventivamente preparati in zone edentule, secondo specifiche sequenze operatorie.

I materiali utilizzati sono di alta qualità e conformi alle norme vigenti. Gli impianti dentali AON Implants sono realizzati in titanio grado 4, sottoposto ad un particolare indurimento durante il suo processo di lavorazione che aumenta le sue prestazioni meccaniche.

La superficie OsteoPore è ottenuta con un processo di doppia acidificazione. Questa tipologia di trattamento impartisce la caratteristica microtopografia che è alla base delle superfici implantari di moderna concezione. Le asperità della superficie sono separate da distanze dell'ordine del micrometro, caratteristica che le rende estremamente efficienti nell'attivazione piatrinica e nella ritenzione del coagulo nel sito implantare. La struttura capillare di questa superficie agisce come una vera spugna, che trattiene i fattori di crescita e garantisce un veloce e favorevole decorso del processo di guarigione ossea.



Linee Implantari
Esagono Esterno

Cyroth

BONE PLATFORM SWITCHING

La particolare morfologia del colletto consente di aumentare la superficie di contatto con l'osso e di preservare una quota maggiore di periostio. La parte conica coronale permette un contatto meno traumatico, con ridotta pressione sulla corticale creale, evitando pericolose compressioni sui vasi sanguigni.

PROFILO

Il profilo a pareti parallele auto-filettanti è molto versatile e particolarmente indicato su osso denso.

FRESATURE APICALI

Rendono l'impianto auto maschiante e contribuiscono a creare stabilità primaria.

PIATTAFORMA UNICA


La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PLATFORM SWITCHING


La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso creale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

PUNTA CONICA


La parte apicale estremamente conica rende possibili siti sottopreparati nell'osso più morbido.

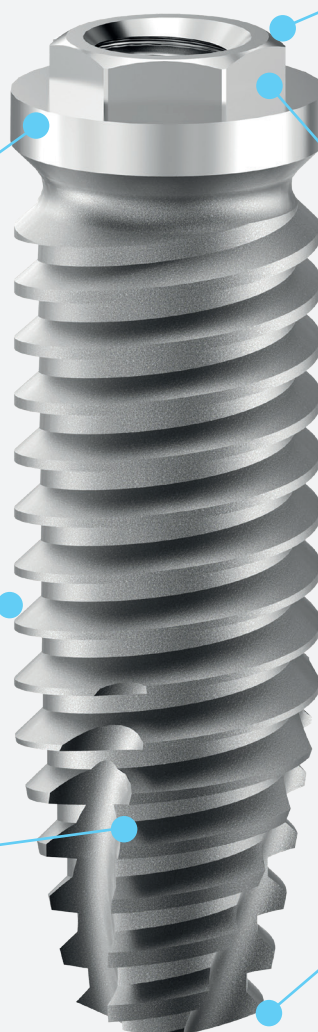

Spire taglienti

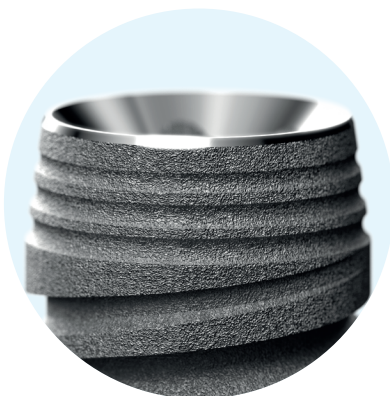

Alta stabilità primaria

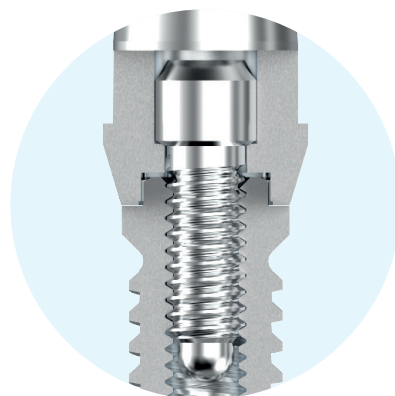

Connessione
sicura e precisa

	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 3,3 	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	ACY33100NPCEE
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	ACY33115NPCEE
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	ACY33130NPCEE
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	ACY33150NPCEE
Ø 3,75 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY37080NPCEE
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY37100NPCEE
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY37115NPCEE
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY37130NPCEE
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY37150NPCEE
Ø 4,0 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY40080NPCEE
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY40100NPCEE
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY40115NPCEE
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY40130NPCEE
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	ACY40150NPCEE
Ø 5,0 	8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4,1 mm	ACY50080NPCEE
	10 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4,1 mm	ACY50100NPCEE
	11,5 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4,1 mm	ACY50115NPCEE
	13 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4,1 mm	ACY50130NPCEE
	15 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4,1 mm	ACY50150NPCEE


RP REGULAR Platform

WP WIDE Platform





Procedura di posizionamento


AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

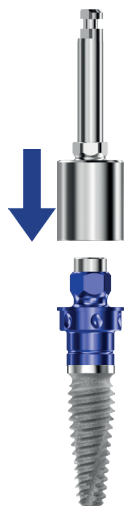

Si può controllare il posizionamento dell'impianto tramite gli appositi reperi sul carrier, che sono allineati con le facce dell'esagono dell'impianto.

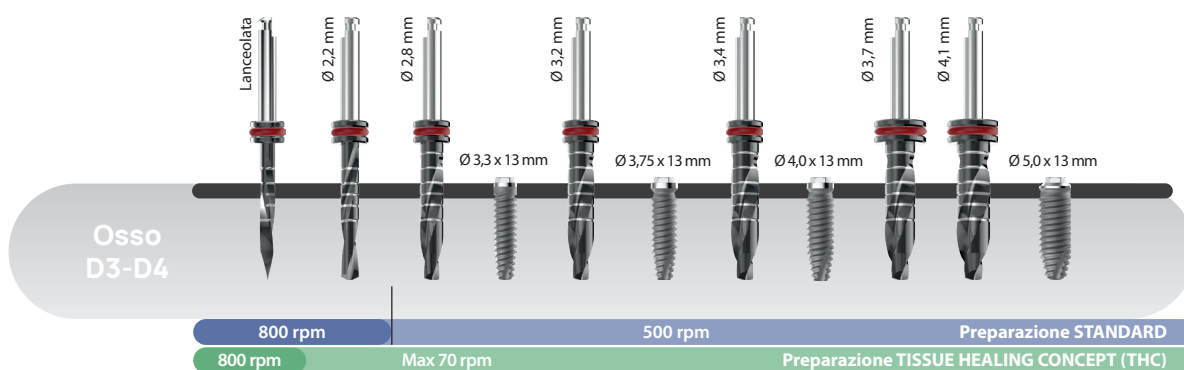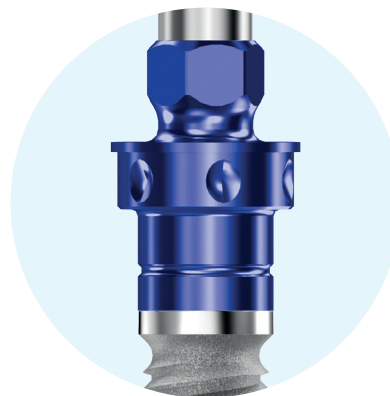

- Preparazione Standard: viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- Preparazione a bassi giri THC: preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

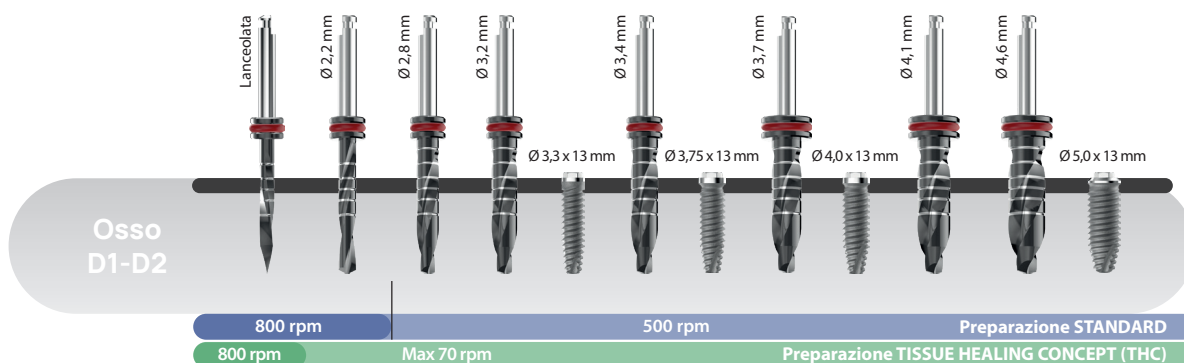

- Preparazione Standard: viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- Preparazione a bassi giri THC: preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).



Linee Implantari
Esagono Esterno

Karoth

DOPPIA SPIRA

Il filetto della fixture ha una spira a due principi, che fa in modo che ad ogni giro la vite avanzi il doppio di una fixture a filetto classico.

FRESATURE APICALI

Rendono l'impianto auto-maschiante e contribuiscono a creare stabilità primaria.

PIATTAFORMA UNICA


La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PLATFORM SWITCHING


La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso creale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

PROFILO


Il profilo troncoconico offre notevoli vantaggi in molte situazioni critiche.

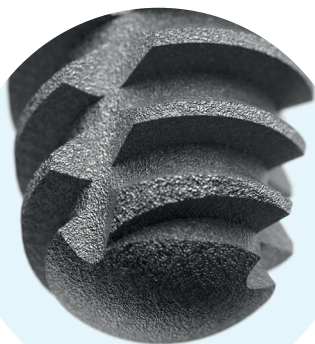

Punta arrotondata

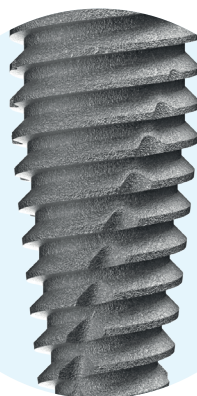

Spira a doppio principio

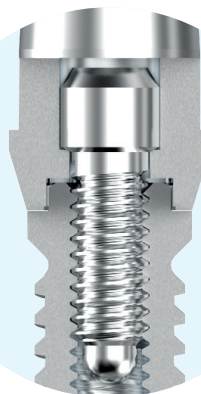

Connessione sicura e precisa

Misure impianto

Karoth

	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 3,3 	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	AKA33100NPCEE
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	AKA33115NPCEE
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	AKA33130NPCEE
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,4 mm	AKA33150NPCEE
			RP	
Ø 4,0 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	AKA40080NPCEE
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	AKA40100NPCEE
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	AKA40115NPCEE
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	AKA40130NPCEE
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 4,1 mm	AKA40150NPCEE
			WP	
Ø 5,0 	8 mm	Ø 3,35 mm	Ø 4,1 mm	AKA50080NPCEE
	10 mm	Ø 3,35 mm	Ø 4,1 mm	AKA50100NPCEE
	11,5 mm	Ø 3,35 mm	Ø 4,1 mm	AKA50115NPCEE
	13 mm	Ø 3,35 mm	Ø 4,1 mm	AKA50130NPCEE
	15 mm	Ø 3,35 mm	Ø 4,1 mm	AKA50150NPCEE
			WP	


RP REGULAR Platform

WP WIDE Platform




Procedura di posizionamento


AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

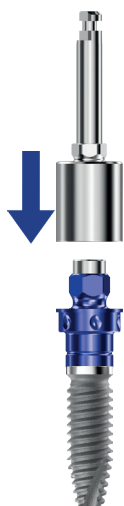


Si può controllare il posizionamento dell'impianto tramite gli appositi reperi sul carrier, che sono allineati con le facce dell'esagono dell'impianto.

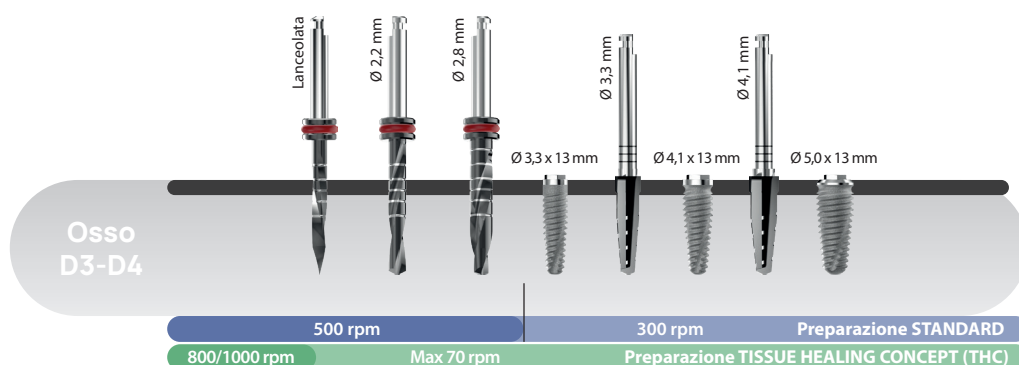

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

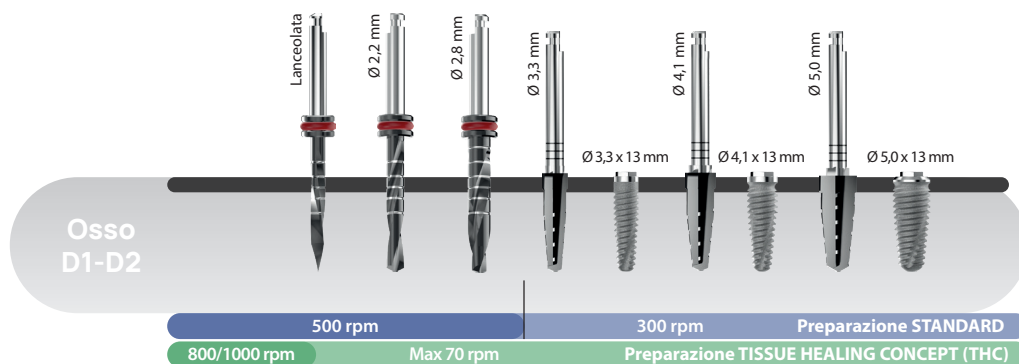

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

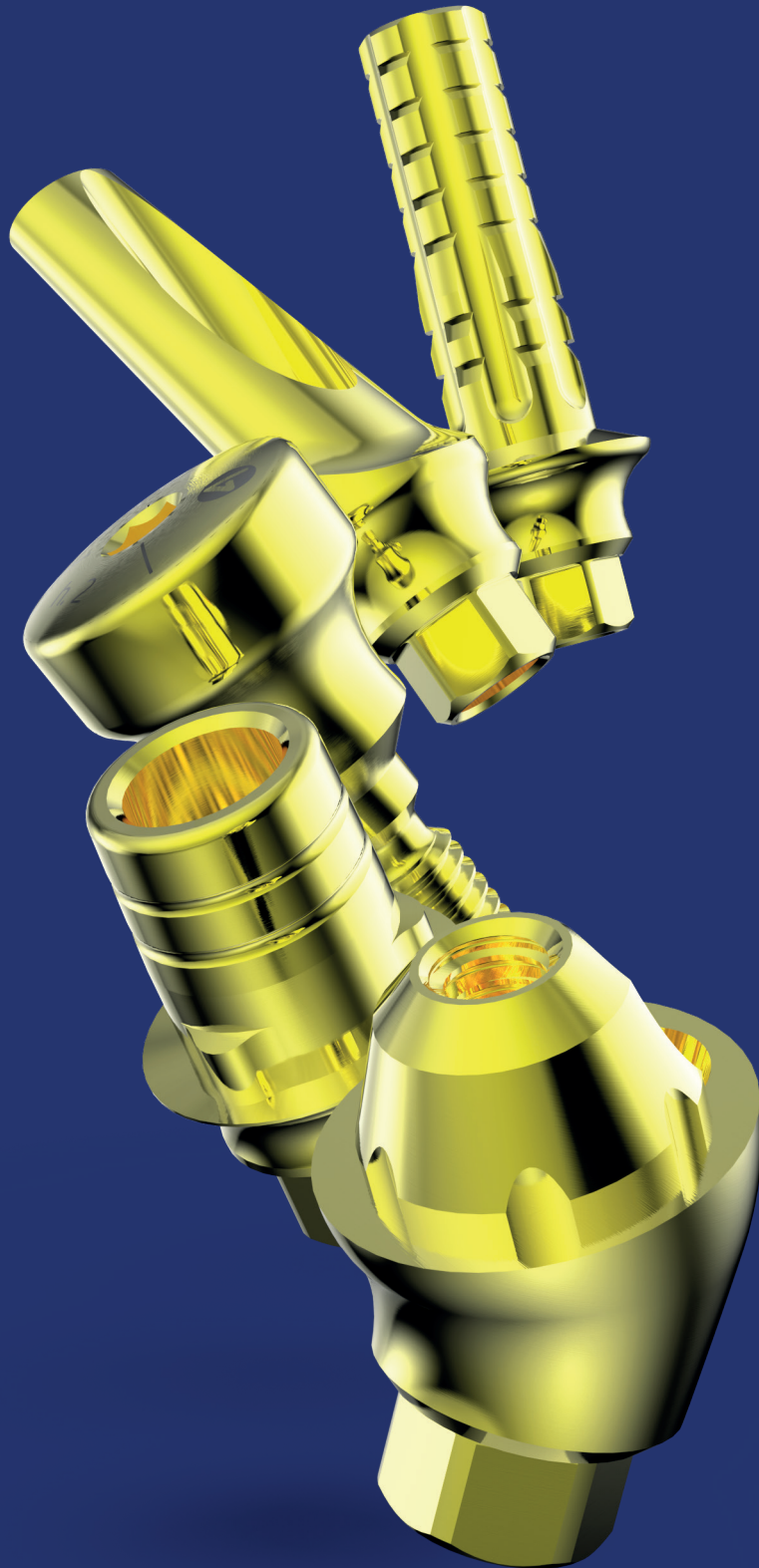

Opzioni protesiche



La linea protesica AON implants, grazie ai profili S-Line, permette di dare più spazio alla crescita dei tessuti molli. L'ampiezza della gamma garantisce al clinico la massima versatilità per ottenere risultati estetici di eccellenza.

Il materiale per la realizzazione delle componenti protesiche è la lega di titanio grado 5. Alcune di esse vengono sottoposte ad un processo di colorazione tramite ossidazione.

NB: l'azienda raccomanda agli utilizzatori di utilizzare solamente componenti originali per protesizzare i propri impianti dentali, in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche meccaniche che contraddistinguono i Sistemi AON Implants.

L'azienda non risponderà in caso vengano utilizzati componenti non originali.

Protesica Generale

Descrizione	Piattaforma / Opzioni / Altezze		Codice prodotto
 Vite di guarigione Normale	Piattaforma Ø 3,4	H. 2 mm	AVG34020NO00
	Piattaforma Ø 3,4	H. 4 mm	AVG34040NO00
	Piattaforma Ø 3,4	H. 6 mm	AVG34060NO00
	Piattaforma Ø 4,1	H. 2 mm	AVG41020NO00
	Piattaforma Ø 4,1	H. 4 mm	AVG41040NO00
	Piattaforma Ø 4,1	H. 6 mm	AVG41060NO00
 Analogo	Piattaforma Ø 3,4		AAN340000000E
	Piattaforma Ø 4,1		AAN410000000E
 Transfer	Piattaforma Ø 3,4	Non Rotante	ATR34000NR00E
	Piattaforma Ø 3,4	Rotante	ATR34000RO00E
	Piattaforma Ø 3,4	Corto non Rot.	ATR34SHONR00E
	Piattaforma Ø 3,4	Corto rotante	ATR34SHORO00E
	Piattaforma Ø 4,1	Non Rotante	ATR41000NR00E
	Piattaforma Ø 4,1	Rotante	ATR41000RO00E
	Piattaforma Ø 4,1	Corto non Rot.	ATR41SHONR00E
	Piattaforma Ø 4,1	Corto rotante	ATR41SHORO00E

Protesica Provvisoria

Descrizione	Piattaforma / Altezze / Opzioni			Codice prodotto
 Moncone provvisorio Titanio	P. Ø 3,4	H. 13 mm	Non rotante	AMO34130PTNRE
	P. Ø 3,4	H. 13 mm	Rotante	AMO34130PTROE
	P. Ø 4,1	H. 9 mm	Non rotante	AMO41090PT00E
	P. Ø 4,1	H. 9 mm	Rotante	AMO41090PTROE
	P. Ø 4,1	H. 13 mm	Non rotante	AMO41130PT00E
	P. Ø 4,1	H. 13 mm	Rotante	AMO41130PTROE
 Moncone provvisorio PEEK	Piattaforma Ø 3,4	Non rotante		AMO34000PE00E
	Piattaforma Ø 4,1	Non rotante		AMO41000PE00E

Protesica Zirconia

Descrizione	Opzioni / Altezze		Codice prodotto
 Moncone per zirconia	Rotante	H. 6 mm	AMO00060ZRROE

Protesica **Cementata**

	Descrizione	Opzioni / Altezze / Angoli		Codice prodotto
	Moncone dritto stretto	Piattaforma Ø 3,4	H. 11 mm	AMO3410DS00E
		Piattaforma Ø 4,1	H. 7 mm	AMO41070DS00E
		Piattaforma Ø 4,1	H. 9 mm	AMO41090DS00E
		Piattaforma Ø 4,1	H. 11 mm	AMO41110DS00E
	Pilastro diretto Co. Cr.	Filetto M 1,4	Multy Utility	AMO41130PCNRE
	Moncone angolato	Piatt. Ø 3,4	Ang. 15° H. 2 mm	AMO34020IN15E
		Piatt. Ø 3,4	Ang. 15° H. 4 mm	AMO34040IN15E
		Piatt. Ø 4,1	Ang. 10° H. 2 mm	AMO41020IN10E
		Piatt. Ø 4,1	Ang. 10° H. 4 mm	AMO41040IN10E
		Piatt. Ø 4,1	Ang. 15° H. 2 mm	AMO41020IN15E
		Piatt. Ø 4,1	Ang. 15° H. 4 mm	AMO41040IN15E
		Piatt. Ø 4,1	Ang. 25° H. 2 mm	AMO41020IN25E
		Piatt. Ø 4,1	Ang. 25° H. 4 mm	AMO41040IN25E
	Moncone calcinabile Slim	Piattaforma Ø 3,4	Non rotante	AMO34SLICANRE
		Piattaforma Ø 3,4	Rotante	AMO34SLICAROE
		Piattaforma Ø 4,1	Non rotante	AMO41SLICANRE
		Piattaforma Ø 4,1	Rotante	AMO41SLICAROE
	Moncone calcinabile Cromo Cobalto	Piattaforma Ø 3,4	Non rotante	AMO34000UCNRE
		Piattaforma Ø 3,4	Rotante	AMO34000UCROE
		Piattaforma Ø 4,1	Non rotante	AMO41000UCNRE
		Piattaforma Ø 4,1	Rotante	AMO41000UCROE

Protesica **Avvitata**

	Descrizione	Opzioni / Altezze / Angoli			Codice prodotto
	Analogo Multy Utility				AMU00000AD000
	Transfer Multy Utility				AMU00000TM000
	Moncone Multy Utility dritto NB	Piattaforma Ø 4,1	H. 1 mm		AMUNB010ST00E
		Piattaforma Ø 4,1	H. 2 mm		AMUNB020ST00E
		Piattaforma Ø 4,1	H. 3 mm		AMUNB030ST00E
		Piattaforma Ø 4,1	H. 4 mm		AMUNB040ST00E
	Moncone Multy Utility angolato NB	Piatt. Ø 4,1	H. 2 mm	Ang. 17°	AMUNB020IN17E
		Piatt. Ø 4,1	H. 3 mm	Ang. 17°	AMUNB030IN17E
		Piatt. Ø 4,1	H. 3 mm	Ang. 30°	AMUNB030IN30E
		Piatt. Ø 4,1	H. 4 mm	Ang. 30°	AMUNB040IN30E
	Vite di guarigione Multy Utility NB	Altezza H. 3 mm (H. tot. 5 mm)			AMUNB030CG000
		Altezza H. 5 mm (H. tot. 7 mm)			AMUNB050CG000
	Cappetta incollaggio Multy Utility NB				AMUNB000CL000
	Moncone provvisorio Multy Utility NB				AMUNB000PT000
	Moncone calcinabile Multy Utility NB				AMUNB000CA000
	Analogo Multy Utility NB				AMUNB000AD000
	Transfer Multy Utility NB				AMUNB000TM000

Protesica **LINK S**

	Descrizione	Diametri / Opzioni	Codice prodotto
	Link S da incollaggio	Piattaforma Ø 3,4 Non rotante	ALI3401000NRE
		Piattaforma Ø 3,4 Rotante	ALI3401000ROE
		Piattaforma Ø 4,1 Non rotante	ALI0001000NRE
		Piattaforma Ø 4,1 Rotante	ALI0001000ROE
	Scanbody Diretto EE		ALI0000000SBO

Protesica **Overdenture**

	Descrizione	Diametri / Altezze / Angoli	Codice prodotto
	Moncone a sfera per overdenture	Piattaforma Ø 3,4 H. 1 mm	AMO34010OVA4E
		Piattaforma Ø 3,4 H. 2 mm	AMO34020OVA4E
		Piattaforma Ø 3,4 H. 3 mm	AMO34030OVA4E
		Piattaforma Ø 3,4 H. 4 mm	AMO34040OVA4E
		Piattaforma Ø 4,1 H. 1 mm	AMO41010OVA4E
		Piattaforma Ø 4,1 H. 2 mm	AMO41020OVA4E
		Piattaforma Ø 4,1 H. 3 mm	AMO41030OVA4E
		Piattaforma Ø 4,1 H. 4 mm	AMO41040OVA4E
	Locator	H. 1 mm	ALK3500002026
		H. 2 mm	ALK3500002027
		H. 3 mm	ALK3500002028
		H. 4 mm	ALK3500002029
		H. 5 mm	ALK3500002030



Ricambi e Laboratorio

Ricambi protesica

	Descrizione	Opzioni	Codice prodotto
	Cappette	Soft Rosa Normale trasparente Hard verde	AMO00025CVCS0 AMO00025CVCH0 AMO00025CVCN0
	Box	Inox	AMO00025CVCX0
	Dischetto		AMO00000CVDPO
	Vite protesica standard	Filetto M 2	AVS000780000E
	Vite Multy Utility NB	Filetto M 1,4	AMUNB000VMINO

Laboratorio

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
	Bandiera doppia Cobalto Cromo	Soft Rosa Normale trasparente Hard verde	ABA00000CCDOO
	Bandiera singola Cobalto Cromo	Inox	ABA00000CCSI0
	Bandiera doppia in PEEK		ABA00000PKDOO
	Bandiera singola in PEEK		ABA00000PKSI0



Strumenti Ricambi Kit chirurgici





Pratico, facile da usare, completo: sono le caratteristiche del Kit chirurgico AON.

Comprende tutte le morfologie di frese, le chiavi manuali e da contrangolo, i pin di posizionamento, cricchetto dinamometrico e cacciavite.




Kit chirurgico Standard




I kit chirurgici AON sono stati studiati per offrire la massima praticità e semplicità d'uso. Sono compatti e contengono tutti gli accessori utili ad eseguire diverse tipologie di intervento. Tutto a portata di mano, sicuri e sterilizzabili.

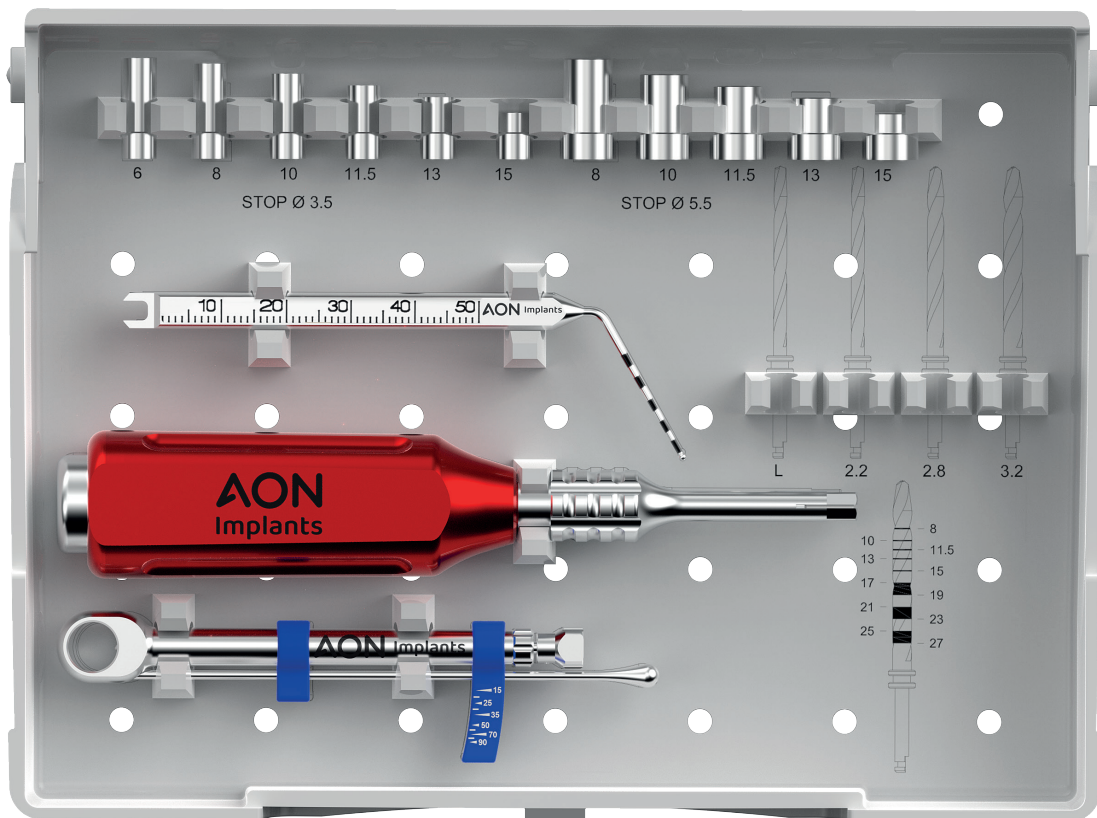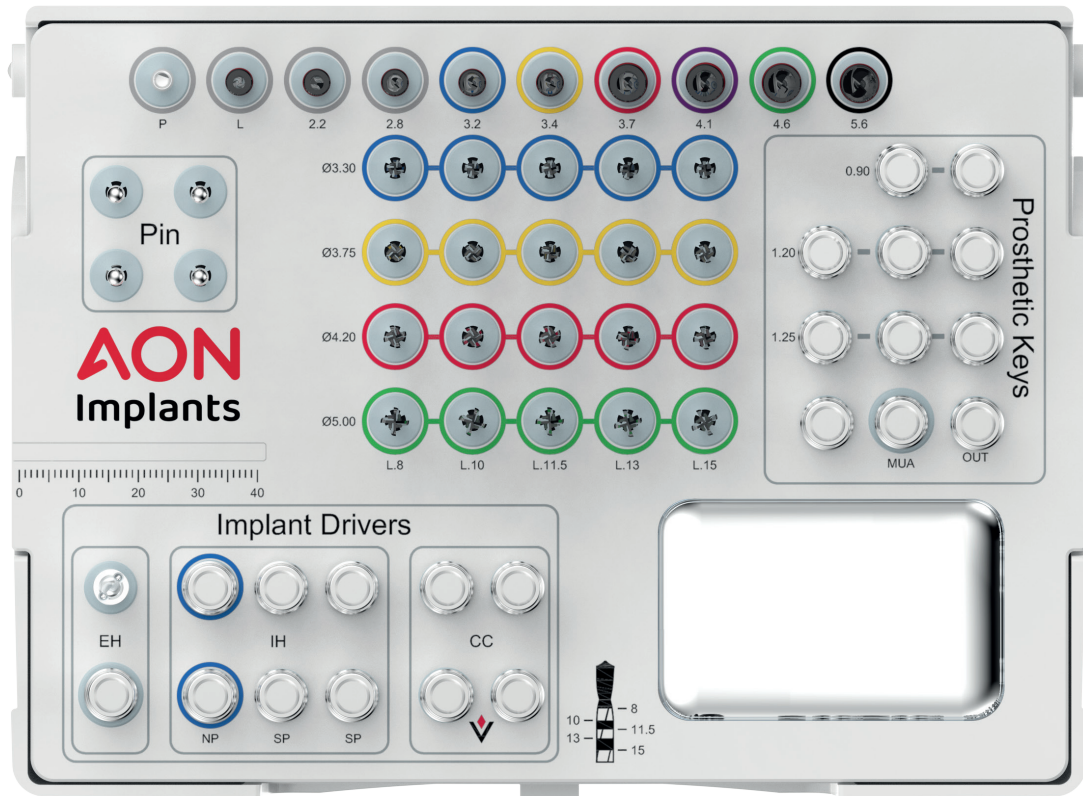



Configurazione Kit per impianto IS-FIVE

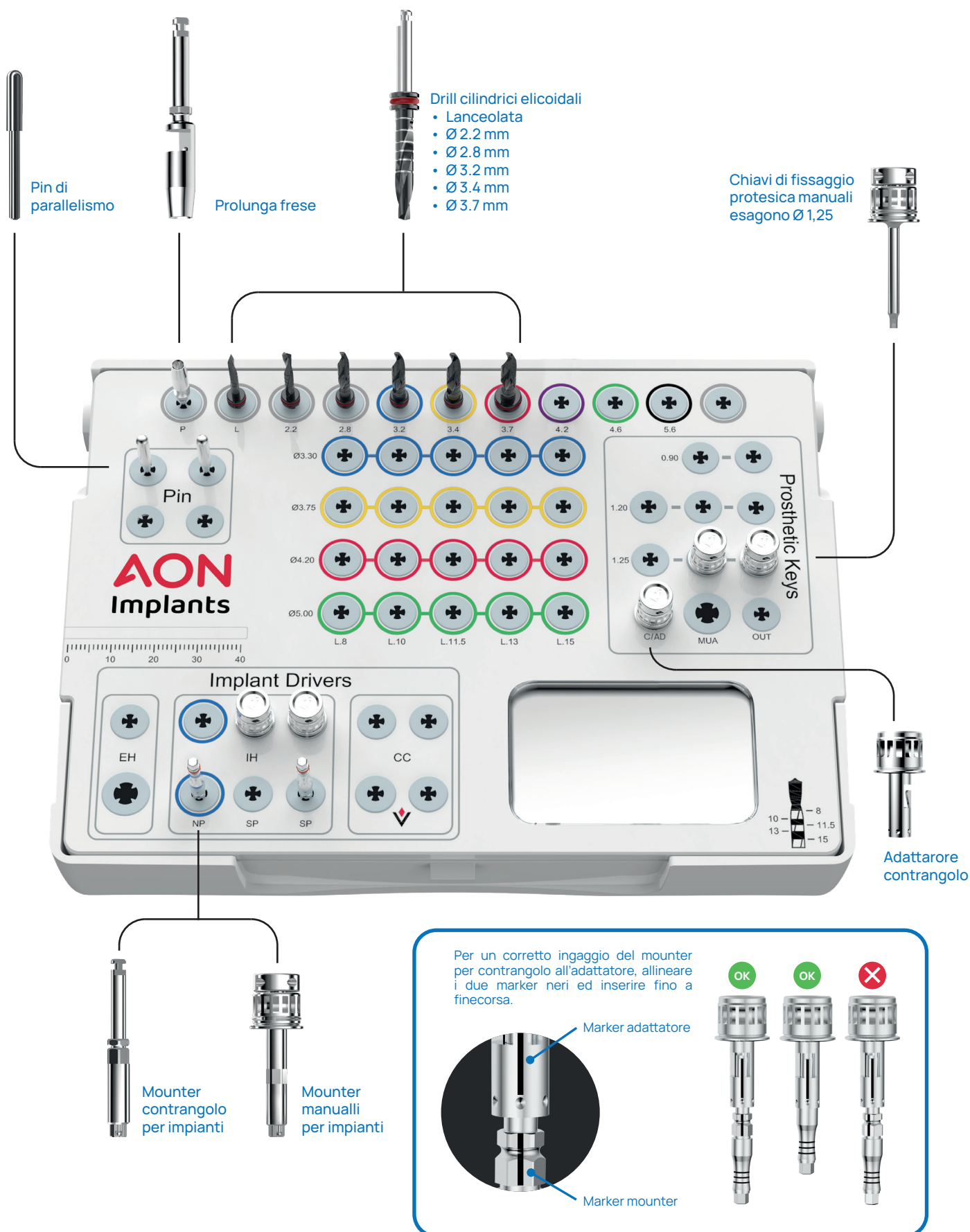


Configurazione Kit per impianto IS-FOUR

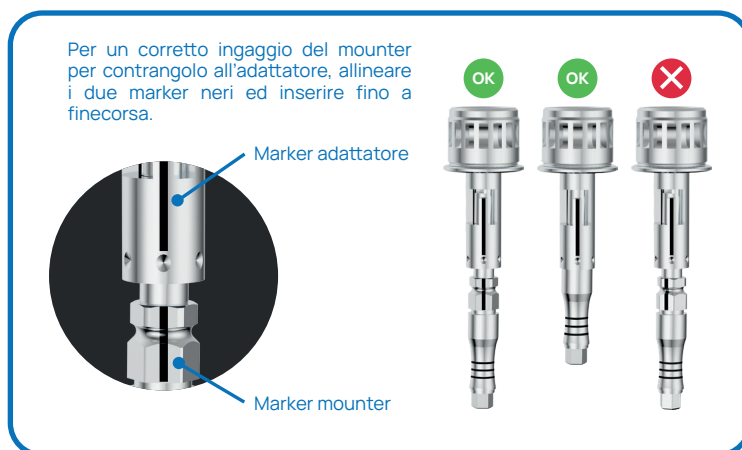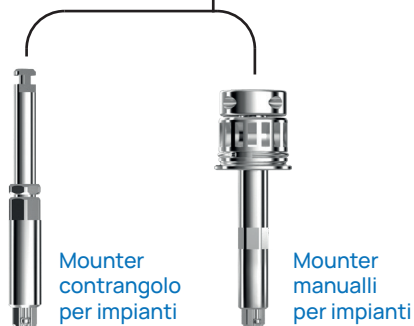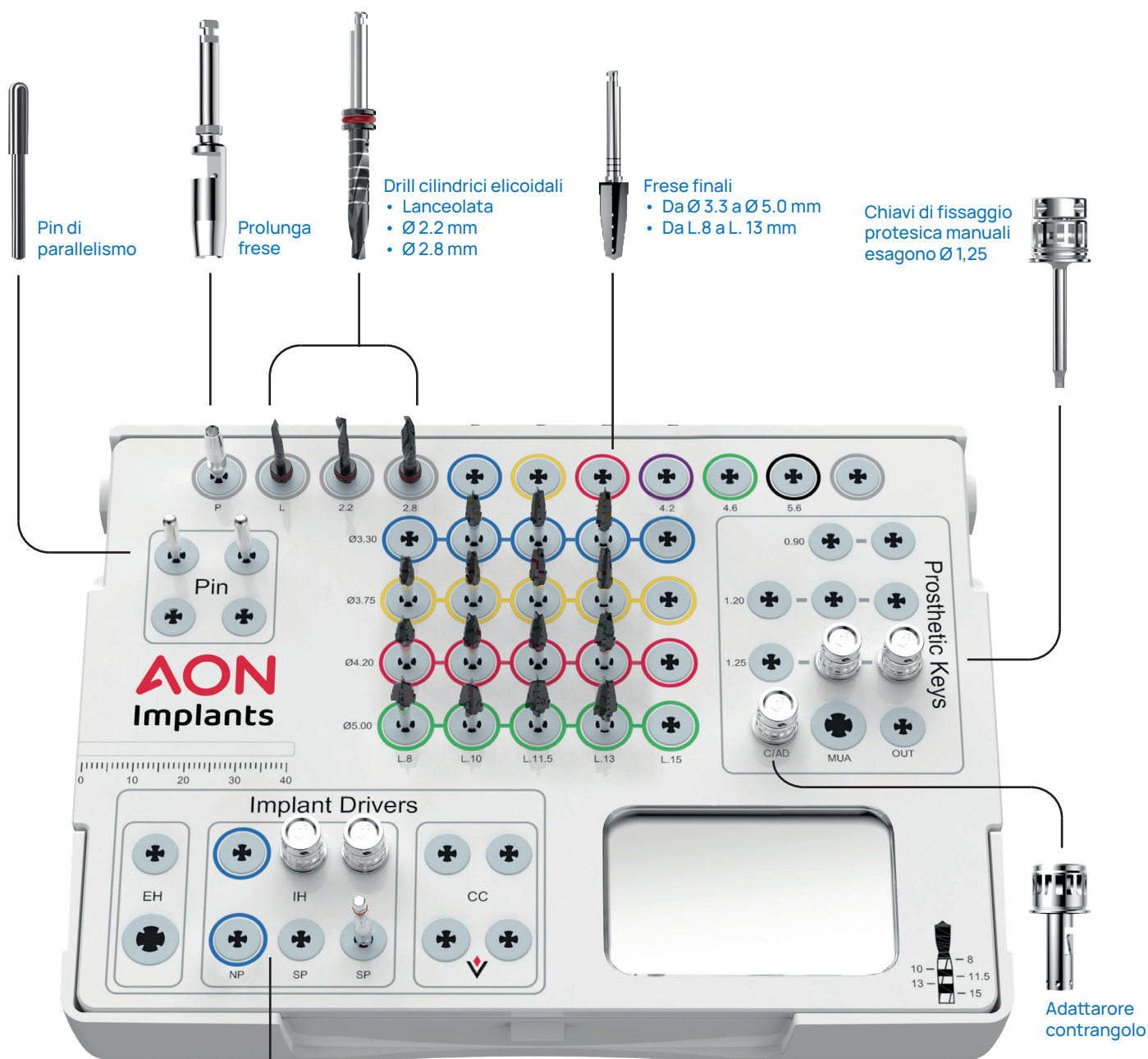

Configurazione Kit per impianto CYROTH

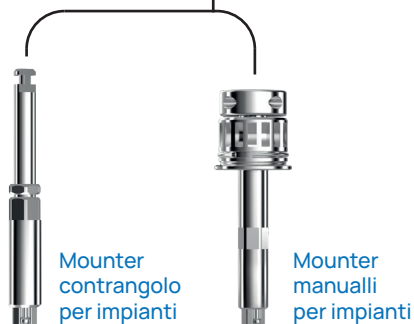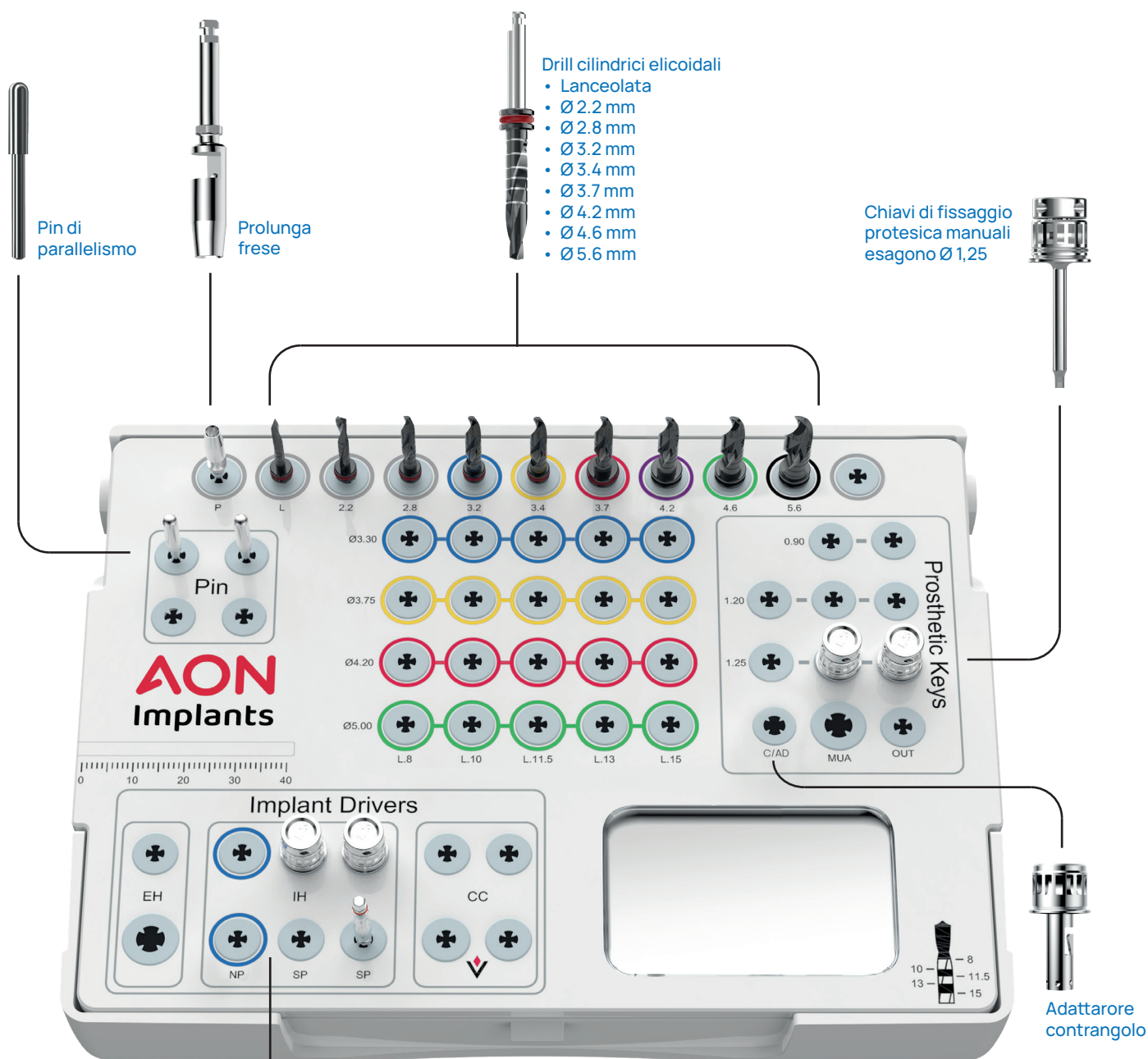

Per un corretto ingaggio del mounter per contrangolo all'adattatore, allineare i due marker neri ed inserire fino a finecorsa.

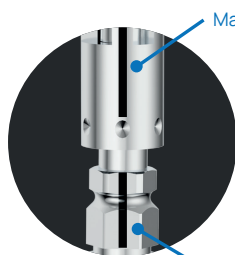

Frese e Stop

Descrizione

Opzioni / Diametri / Altezze

Codice prodotto



Fresa lanceolata

Universale

Diametro Ø 2 mm

AUN20000FRLLO



Drill cilindrico elicoidale

Diametro Ø 2,2 mm

AUN22000DR000

Diametro Ø 2,8 mm

AUN28000DR000

Diametro Ø 3,2 mm

AUN32000DR000

Diametro Ø 3,4 mm

AUN34000DR000

Diametro Ø 3,7 mm

AUN37000DR000

Diametro Ø 4,1 mm

AUN41000DR000

Diametro Ø 4,6 mm

AUN46000DR000

Diametro Ø 5,6 mm

AUN56000DR000



Drill cilindrico elicoidale
impianti short

Diametro Ø 2,2 mm

AUN22SHODR000

Diametro Ø 2,8 mm

AUN28SHODR000

Diametro Ø 3,2 mm

AUN32SHODR000

Diametro Ø 3,4 mm

AUN34SHODR000

Diametro Ø 3,7 mm

AUN37SHODR000

Diametro Ø 4,1 mm

AUN41SHODR000

Diametro Ø 4,6 mm

AUN46SHODR000

Diametro Ø 5,6 mm

AUN56SHODR000



Fresa finale
IS-FOUR

Diametro Ø 3,3 mm

H. 10 mm

AIF33100FRFIO

Diametro Ø 3,3 mm

H. 11,5 mm

AIF33115FRFIO

Diametro Ø 3,3 mm

H. 13 mm

AIF33130FRFIO

Diametro Ø 3,3 mm

H. 15 mm

AIF33150FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 8 mm

AIF37080FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 10 mm

AIF37100FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 11,5 mm

AIF37115FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 13 mm

AIF37130FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 15 mm

AIF37150FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 8 mm

AIF42080FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 10 mm

AIF42100FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 11,5 mm

AIF42115FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 13 mm

AIF42130FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 15 mm

AIF42150FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 8 mm

AIF50080FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 10 mm

AIF50100FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 11,5 mm

AIF50115FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 13 mm

AIF50130FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 15 mm

AIF50150FRFIO



Stop Ø 3,5 mm

H. 5 mm

AUN3505000STO

H. 6 mm

AUN3506000STO

H. 7 mm

AUN3507000STO

H. 8 mm

AUN3508000STO

H. 10 mm

AUN3510000STO

H. 11,5 mm

AUN3511500STO

H. 13 mm

AUN3513000STO

H. 15 mm

AUN3515000STO



Stop Ø 5,5 mm

H. 5 mm

AUN5505000STO

H. 7 mm

AUN5507000STO

H. 8 mm

AUN5508000STO

H. 10 mm

AUN5510000STO

H. 11,5 mm

AUN5511500STO

H. 13 mm

AUN5513000STO

H. 15 mm


AUN5515000STO

Chiavi di fissaggio

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Lunghezze	Codice prodotto
	Mounter manuale impianti extra-lunga	Lunghezza 19 mm	AST00LNGAPCRI
	Mounter manuale impianti lunga	Lunghezza 13 mm	AST00000APCRI
	Contrangolo impianti lunga Narrow	NP Lunghezza 14 mm	AST00160CMCAN
	Contrangolo impianti lunga	Lunghezza 14 mm	AST00160CBITK
	Contrangolo protesica lunga	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 14 mm Lunghezza 14 mm	AST12000APCAB AST00000PRCAI
	Contrangolo protesica corta	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 9 mm Lunghezza 9 mm	AST12SHOAPCAB AST00SHOCMCEK
	Fissaggio manuale protesica corta	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 8 mm	AST1BSHOAPCRB
	Fissaggio manuale protesica lunga	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 14 mm	AST1B000APCRB
	Fissaggio manuale protesica extra-lunga	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 25 mm	AST12530APCRB
	Multy Utility NB dritto lunga	Lunghezza 14 mm	AST00000APCRE
	Multy Utility NB dritto corta	Lunghezza 8 mm	AST00SHOAPCRE
	Adattatore per contrangolo		AST00000APCRO

Strumenti


	Descrizione	Opzioni / Diametri	Codice prodotto
	Pin di parallelismo	Diametro Ø 2 mm	AST20000CCIP0
	Misuratore di profondità		AST00000SUIP0
	Cricchetto donamometrico		AST00000CCDN0
	Cacciavite ad inserti automatico		AST00000CTAT0
	Chiave inversa per estrazione monconi		AST00000CHIN0
	Prolunga per frese		AST000000PF0
	Guida posizionamento impianti		AST00000G4000

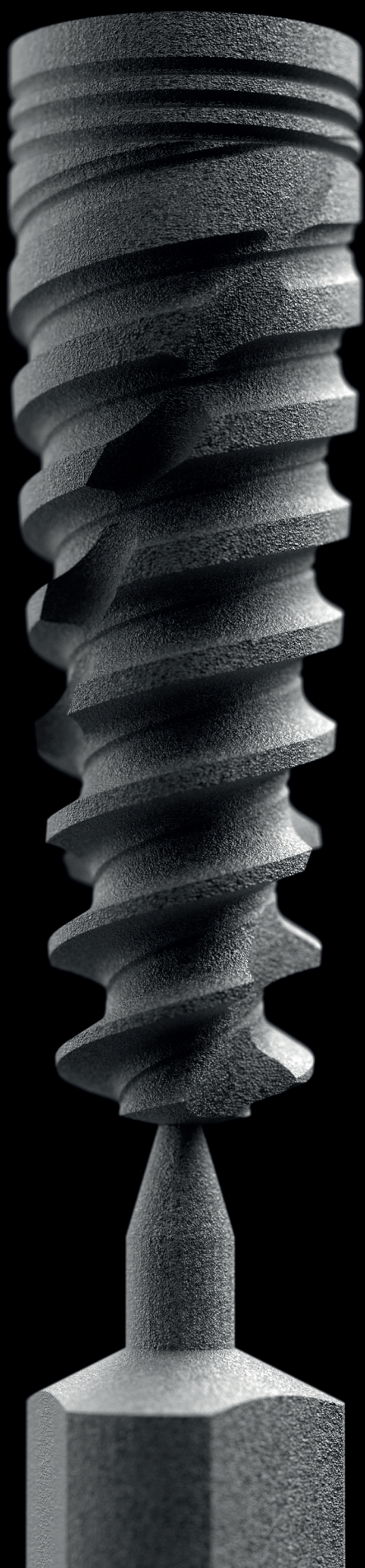

Impianto sospeso

Zero contatti
100% sicurezza

Packaging

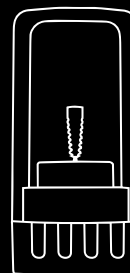

Sicurezza

A garanzia di una totale sterilità degli impianti abbiamo studiato una soluzione innovativa: grazie al suo peduncolo in titanio, l'impianto rimane sospeso all'interno del blister a doppio sigillo. E' possibile così prelevare dalla sua sede tramite il manipolo, evitando contatti con altri materiali.

Facile e leggibile.

Tutti i dati tecnici dell'impianto, quali modello, diametro, lunghezza e piattaforma sono riportati sulla scatolina, per una veloce e facile lettura.

Ogni cosa è stata pensata per un'esperienza intuitiva!






Guida apertura blister



Scansiona il QR Code per
vedere il video animato.

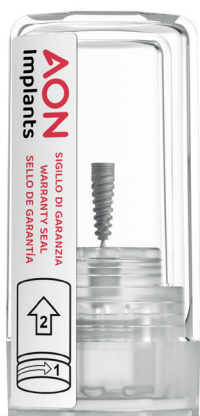

Sigillo di Garanzia

1

Tutti i nostri impianti sono
dotati di sigillo di garanzia
apposto sul blister esterno.
Verificarne l'integrità.



Apertura del blister

2

Ruotare il tappo inferiore
per rompere il sigillo ed
aprire il blister esterno.



Estrazione blister interno

3

A questo punto sarà possibile
estrarre il secondo blister
contenente l'impianto.



Apertura blister interno

4


Rimuovendo il tappo inferiore dalla
capsula superiore sarà possibile
raggiungere l'impianto sospeso.



Posizionamento mounter

5

Utilizzare il contrangolo ed il mounter presente nel kit per agganciare la connessione dell'impianto, procedendo con cautela.

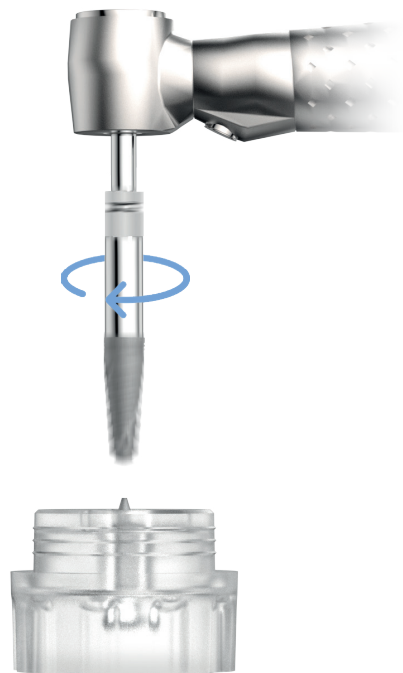

Estrazione impianto

6

Una volta agganciato l'impianto al mounter, sarà possibile azionare la rotazione del contrangolo per staccare l'impianto dalla base in titanio. **Max 20 rpm.**



Posizionamento implantare

7


Sarà ora possibile posizionare direttamente l'impianto nel sito implantare.



Vite tappo

8

Rimuovere il tappo tirando la parte inferiore della basetta dell'impianto per raggiungere la vite.

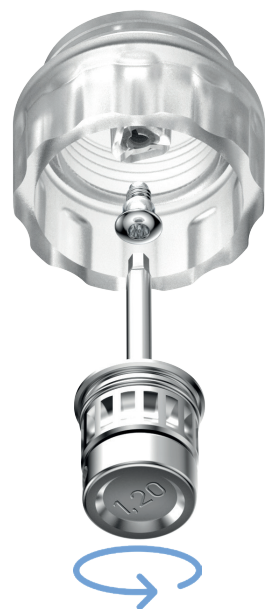

Estrazione vite

9

Ingaggiare la vite con la chiave manuale da Ø 1,25 presente nel Kit. Ruotare in senso antiorario per svitarla dal suo alloggiamento.



Info ed avvertenze



Studio del caso e progettazione

- Colloquio con il paziente per verificare esigenze ed aspettative.
- Esame clinico.
- Rx panoramica.
- Rx dental scan o Rx 3D cone beam.
- Nei casi in cui la radiologia tradizionale non sia sufficiente per pianificare l'intervento, sarà opportuno progettare sulla base dei dati TAC con programma dedicato di simulazione.
- Modelli studio e ceratura diagnostica.
- Dima chirurgica.



Criteri di esclusione temporanei

- Patologie locali e/o sistemiche di origine infettiva
- Febbre
- Stress psico-fisico
- Rinite virale o allergica
- Patologie dell'apparato respiratorio



Criteri di esclusione generali

- Diabete scompensato.
- Recente infarto miocardico e ictus.
- Pregresso o attuale trattamento con bifosfonati.
- Pazienti con aspettative estetiche non realizzabili.
- Pazienti con gravi malattie epatiche e renali, malattie neoplastiche, immunodepressive.
- Pazienti psicotici e/o con instabilità emotiva.
- Pazienti sottoposti a radioterapia locale.
- Pazienti con grave bruxismo e/o gravi discrepanze cranio-facciali e maxillo-mandibolari.
- Pazienti che abusano di alcool e droghe.
- Pazienti con grave dismetabolismo osseo.
- Fumatori.



Preparazione del paziente

La visita del paziente che si presta ad un intervento di implantologia orale deve comprendere un'analisi dettagliata delle condizioni generali di salute e la valutazione attenta della motivazione e delle aspettative del soggetto.

Note

**“All
or
Nothing,”**





AON Implants Srl
Via Alessandro Manzoni, 25
36040 Grisignano di Zocco (VI)
ITALY

info@aonimplants.com
+39 0444 614994

www.aonimplants.it



Inquadra il QR CODE
con il tuo smartphone