


AON

Implants

All or Nothing

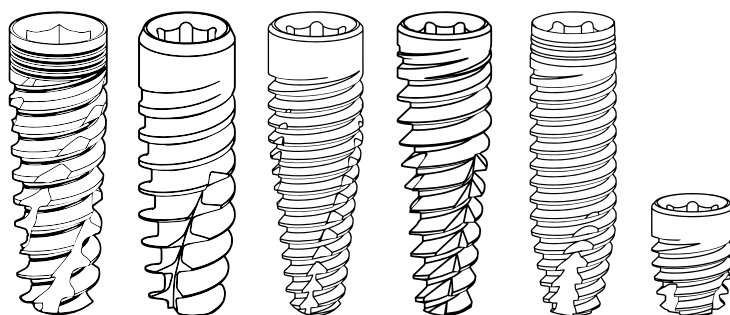

Catalogo Impianti
Esagono Interno



L'azienda

Dal 2005 AoN Implants porta nel mercato medicale ed implantologico tutta l'esperienza ed il pregio della produzione Made in Italy, avendo la capacità di ascoltare il mercato con spirito attento, pragmatico, visionario.

AoN, acronimo di "All or Nothing", nasce con l'idea di affermarsi come punto di riferimento cardine nel mondo dell'implantologia, evolvendo prodotti e concetti canonici, offrendo ad implantologi e chirurghi odontoiatri soluzioni a tutto tondo.

Gli obiettivi

Il nostro focus primario è l'operatore di settore (odontoiatra, chirurgo, tecnico di laboratorio) con il quale lavoriamo a stretto contatto, direttamente sul campo.

I nostri prodotti sono il frutto di un attento ascolto di chi giornalmente affronta i più disparati casi con i propri pazienti.

Questo ci ha permesso di acquisire un know-how di altissima qualità ed esprimerci operativamente con soluzioni all'avanguardia, resolvendo molte delle problematiche tecniche da sempre sofferte e condivise dagli operatori.


Un focus che resterà sempre centrato sugli obiettivi dei professionisti del settore odontoiatrico!

Qualità e Sicurezza

Tutti i prodotti realizzati da AoN Implants sono sottoposti a rigorosi processi di verifica e controllo qualità, ed hanno ottenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001
ISO 13485



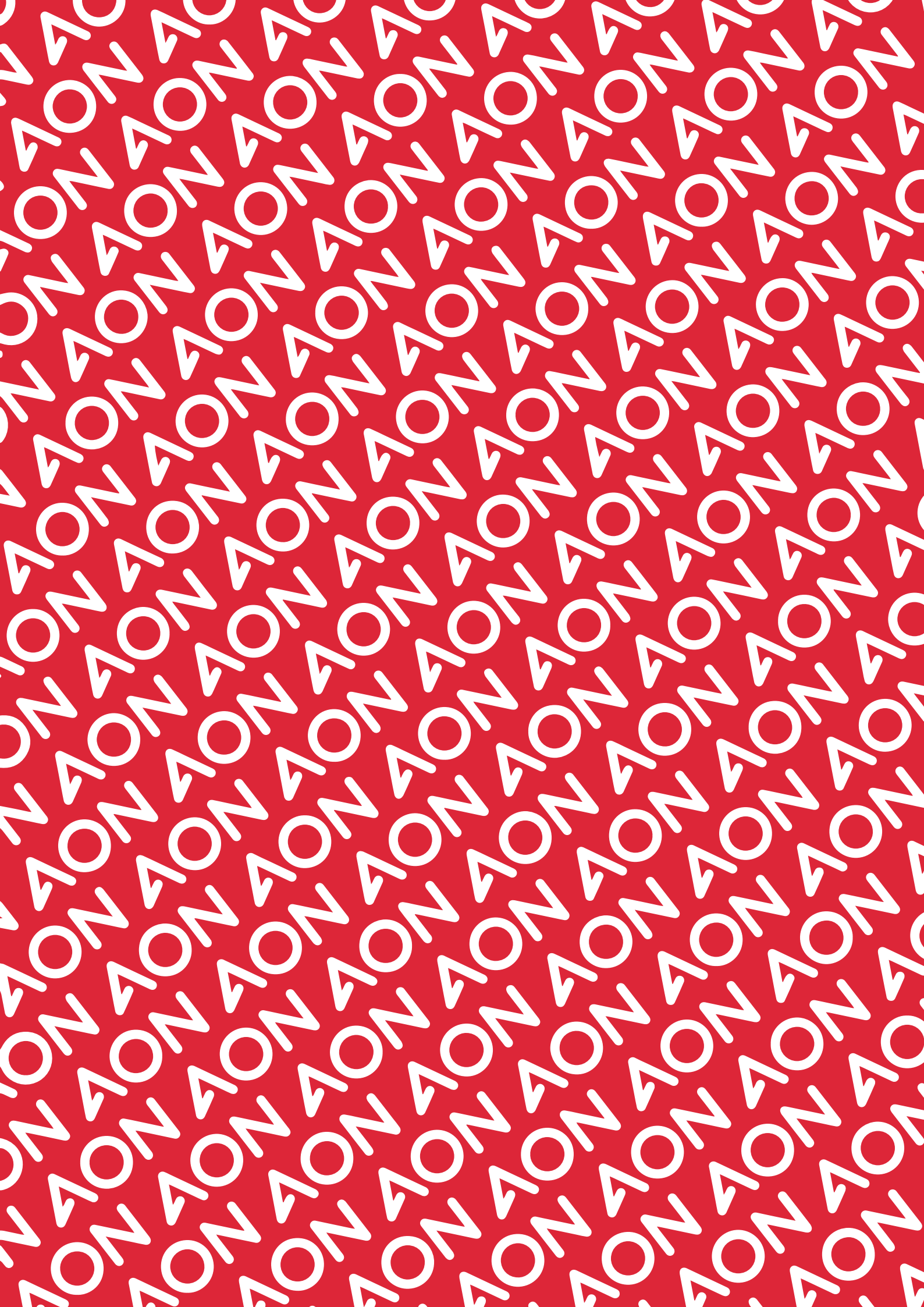

Indice dei contenuti



INTRODUZIONE	6
---------------------	----------

SISTEMI IMPLANTARI	8
---------------------------	----------




Materiali e superficie	9
Impianto IS-FIVE	10
Protocollo IS-FIVE	11
Impianto IS-FOUR	12
Protocollo IS-FOUR	13
Impianto CYROTH	14
Protocollo CYROTH	16
Impianto CYROTH SHORT	17
Protocollo CYROTH SHORT	18
Impianto KAROTH	19
Protocollo KAROTH	20
Impianto IS-TWO	21
Protocollo IS-TWO	22

OPZIONI PROTESICHE	24
---------------------------	-----------



Generale	25
Provvisoria	27
Zirconia	27
T-BASE	28
3POD	28
Cementata	29
Avvitata	30
Overdenture	31

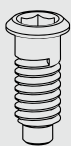


RICAMBI E LABORATORIO

Ricambi	32
---------	----



KIT E STRUMENTI

Kit chirurgico Standard	35
Configurazione kit IS-5	36
Configurazione Kit IS-4	37
Configurazione Kit Cyroth	38
Frese	39
Stop	39
Mounter	40
Chiavi di fissaggio	40
Chiavi MUA	40
Strumenti	41

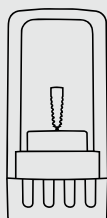

GUIDA CONFEZIONI

Packaging	43
Apertura blister	44



INFO ED AVVERTENZE

46

I nostri Sistemi Implantari


Gli impianti dentali AON ad esagono interno sono progettati per affrontare tutti i casi di implantologia con estrema versatilità e sicurezza. La connessione performante assicura un accoppiamento protesico sempre preciso e stabile.

Il particolare trattamento superficiale, abbinato allo studio del design del corpo degli impianti, permette un'ottima osteointegrazione.




L'ampia gamma di componenti protesiche permette all'operatore di affrontare tutte le tecniche riabilitative più diffuse e performanti.

Per semplificare ulteriormente la gestione, le componenti presentano colorazioni e simbologie che aiutano ad identificarne le misure e caratteristiche.

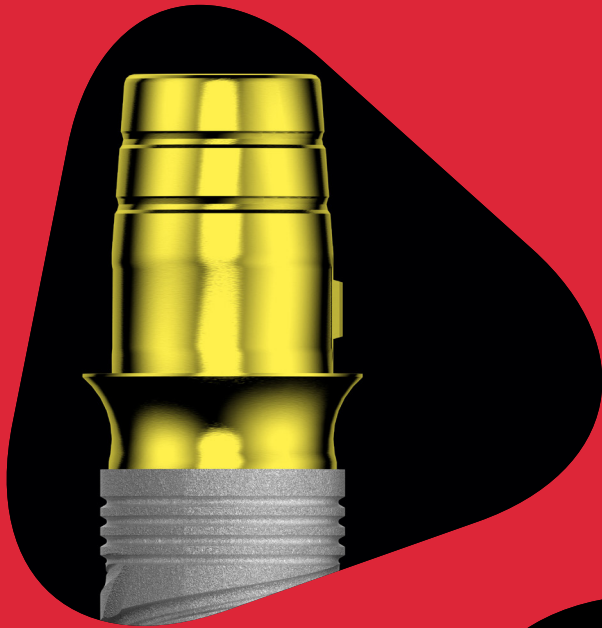


I **profili protesici S-Line** sono stati progettati per rispettare gli spazi biologici corretti e favorire la ricrescita dell'osso.

Il design degli impianti restituisce un feeling di assoluta semplicità e sicurezza nel posizionamento, grazie all'elevata stabilità primaria e capacità automaschianti.

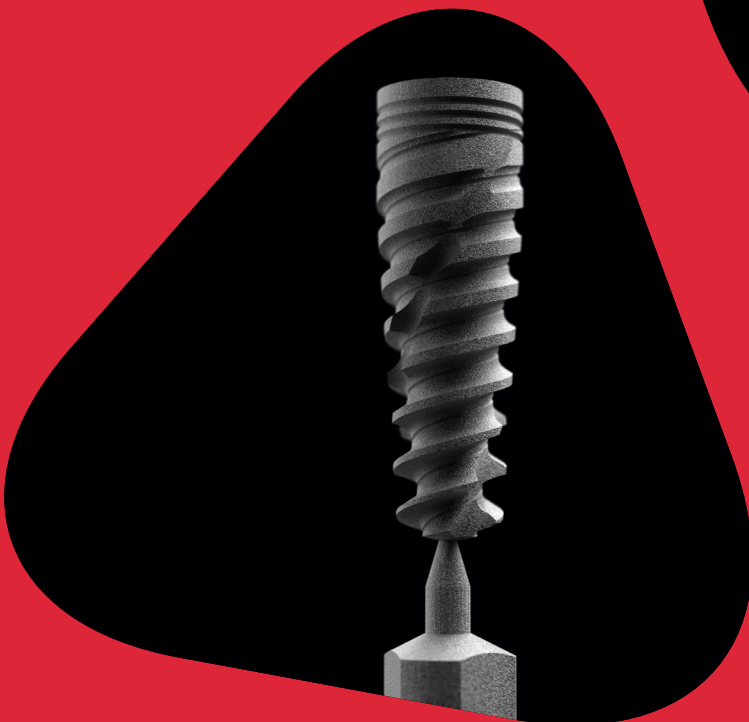

L'innovativo sistema ad **impianto sospeso** introdotto nel packaging degli impianti riduce il rischio di contaminazioni da materiali ed agenti esterni. Prelevare l'impianto dal suo blister non è mai stato così sicuro. L'ingegno made in Italy!

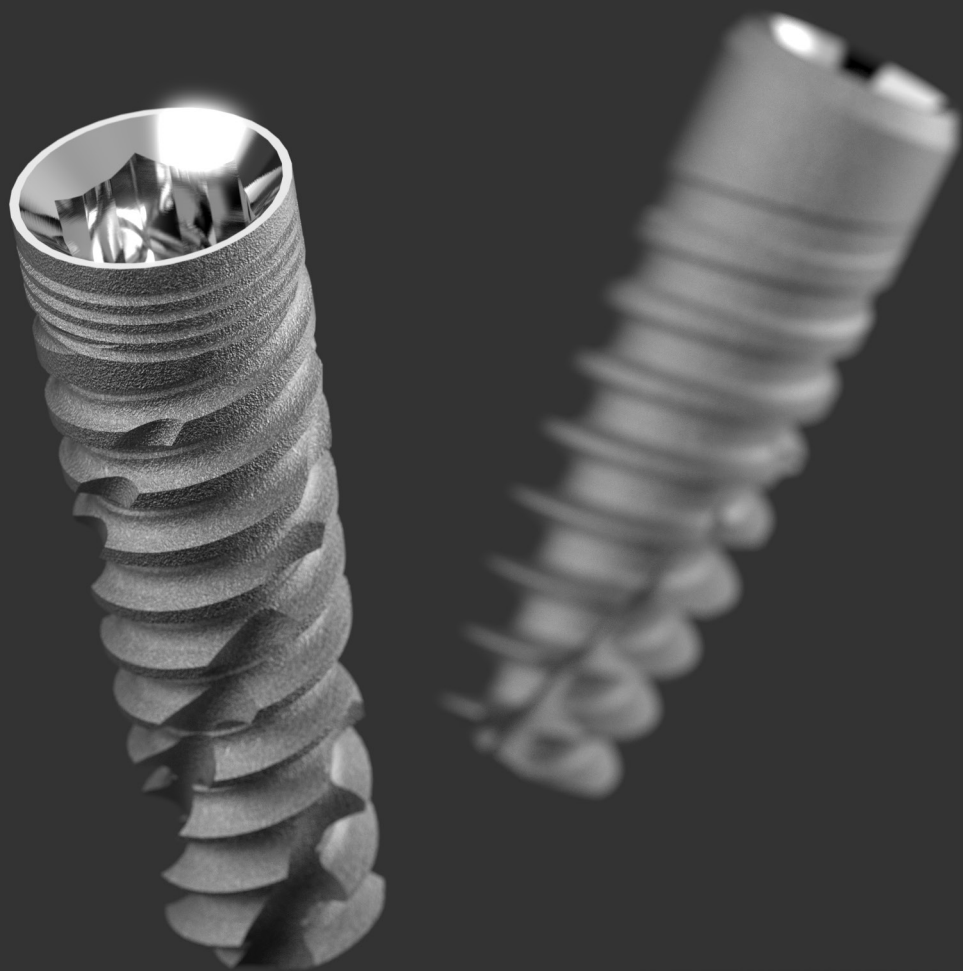

Sistemi Implantari



Gli impianti dentali AoN Implants sono viti endosseee progettate e dimensionate per tutte le applicazioni nel settore della chirurgia odontoiatrica. Possono essere applicate in siti preventivamente preparati in zone edentule, secondo specifiche sequenze operatorie.

I materiali utilizzati sono di alta qualità e conformi alle norme vigenti. Gli impianti dentali AON Implants sono realizzati in titanio grado 4, sottoposto ad un particolare indurimento durante il suo processo di lavorazione che aumenta le sue prestazioni meccaniche.

La superficie OsteoPore è ottenuta con un processo di doppia acidificazione. Questa tipologia di trattamento impartisce la caratteristica microtopografia che è alla base delle superfici implantari di moderna concezione. Le asperità della superficie sono separate da distanze dell'ordine del micrometro, caratteristica che le rende estremamente efficienti nell'attivazione piatrinica e nella ritenzione del coagulo nel sito implantare. La struttura capillare di questa superficie agisce come una vera spugna, che trattiene i fattori di crescita e garantisce un veloce e favorevole decorso del processo di guarigione ossea.



Linee Implantari
Esagono Interno

IS-Five

SPIRA PROGRESSIVA

La spira ha un andamento progressivo apico-coronale. Questa durante la fase di avvitamento genera una compattazione orizzontale della midollare, migliorando la stabilità primaria. (Ideale su osso D3-D4)

SCANALATURE APICALI

Rendono l'impianto automaschiante.

PLATFORM SWITCHING

La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso crestale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

PROFILO


Il profilo troncoconico offre notevoli vantaggi in molte situazioni critiche.

APICE SAFE


Apice stondato per un posizionamento sicuro.




Guarda il video
di IS-FIVE

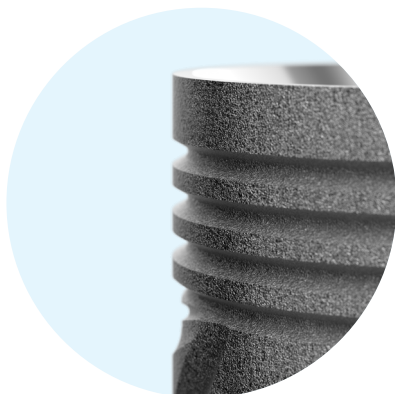

Micro Rings coronali

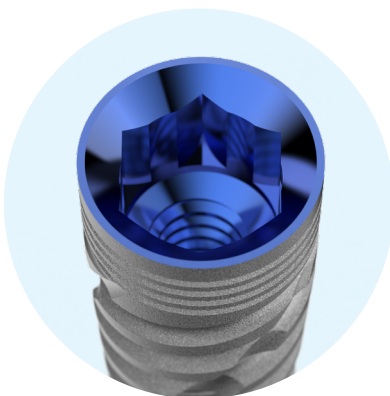

Connessione Standard e Narrow

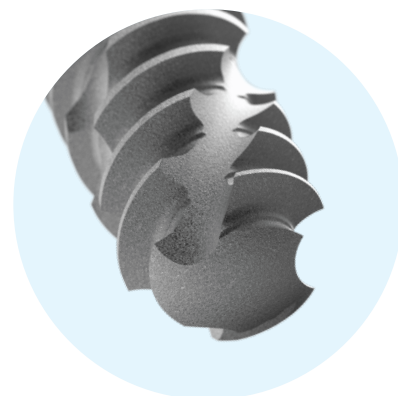

Apice Safe-Design

	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 3,3 	10 mm	Ø 2,35 mm	Ø 3,2 mm	NP AFV33100N2000 AFV33115N2000 AFV33130N2000 AFV33160N2000
	11,5 mm	Ø 2,35 mm	Ø 3,2 mm	
	13 mm	Ø 2,35 mm	Ø 3,2 mm	
	16 mm	Ø 2,35 mm	Ø 3,2 mm	
Ø 3,75 	8 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,5 mm	RP AFV37080N2000 AFV37100N2000 AFV37115N2000 AFV37130N2000 AFV37160N2000
	10 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,5 mm	
	11,5 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,5 mm	
	13 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,5 mm	
	16 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,5 mm	
Ø 4,2 	6 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	RP AFV42060N2000 AFV42080N2000 AFV42100N2000 AFV42115N2000 AFV42130N2000 AFV42160N2000
	8 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	
	10 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	
	11,5 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	
	13 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	
	16 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	
Ø 5,0 	6 mm	Ø 4,35 mm	Ø 3,5 mm	RP AFV50060N2000 AFV50080N2000 AFV50100N2000 AFV50115N2000 AFV50130N2000 AFV50160N2000
	8 mm	Ø 4,35 mm	Ø 3,5 mm	
	10 mm	Ø 4,35 mm	Ø 3,5 mm	
	11,5 mm	Ø 4,35 mm	Ø 3,5 mm	
	13 mm	Ø 4,35 mm	Ø 3,5 mm	
	16 mm	Ø 4,35 mm	Ø 3,5 mm	


NP NARROW Platform

RP REGULAR Platform


RP

Procedura di posizionamento

AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio. La fresa finale IS-FIVE fornita in dotazione con l'impianto è sterile. **La fresa è monouso.**

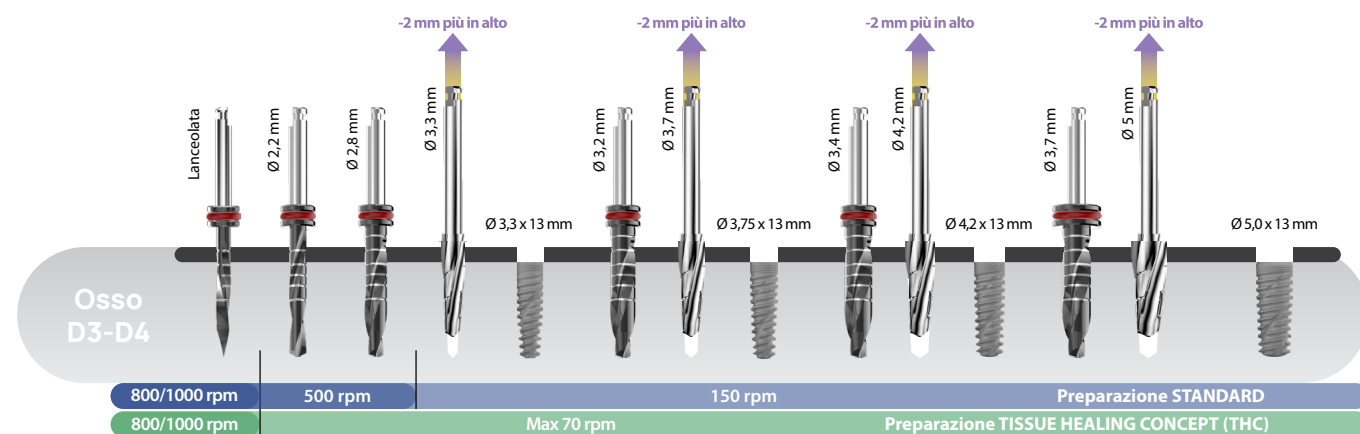

AVVERTENZA in osso morbido: la preparazione con fresa finale va mantenuta **2 mm più in alto** rispetto alla sua lunghezza totale.

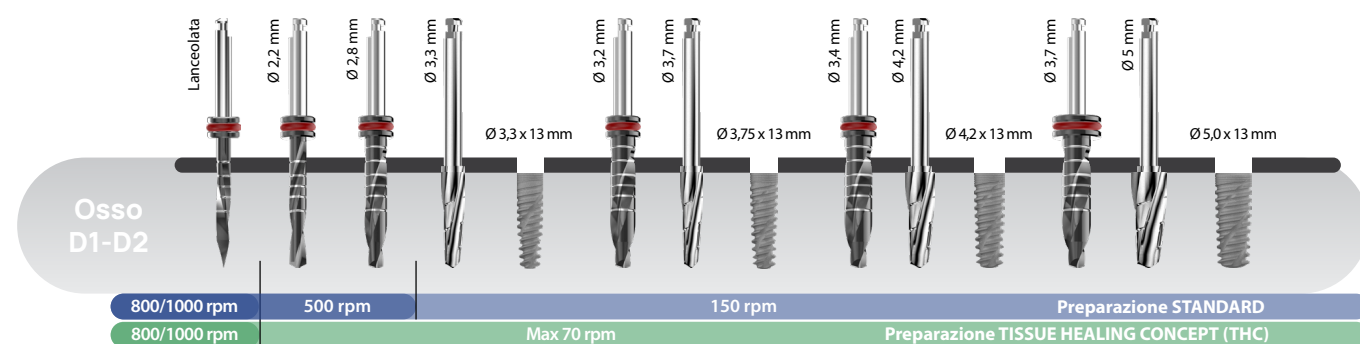

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).



Linee Implantari
Esagono Interno

IS-Four

SPIRA PROGRESSIVA

La spira ha un andamento progressivo apico-coronale. Questa durante la fase di avvitamento genera una compattazione orizzontale della midollare, migliorando la stabilità primaria. (Ideale su osso D3-D4)

PROFILO

Il profilo troncoconico offre notevoli vantaggi in molte situazioni critiche.

SPIRA APICALE TAGLIANTE

Conferisce all'impianto capacità autofilettante e automaschiante.

PIATTAFORMA UNICA



La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PLATFORM SWITCHING

La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso crestale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

SCANALATURE APICALI


Rendono l'impianto automaschiante e contribuiscono al recupero di frammenti ossei misti a sangue e fattori di crescita di origine midollare.

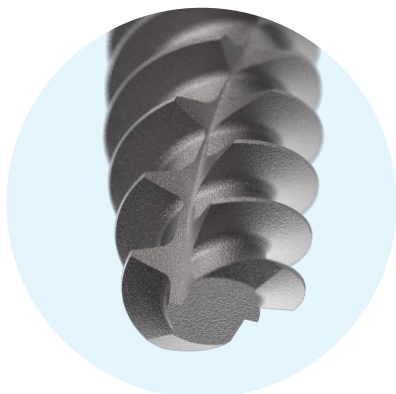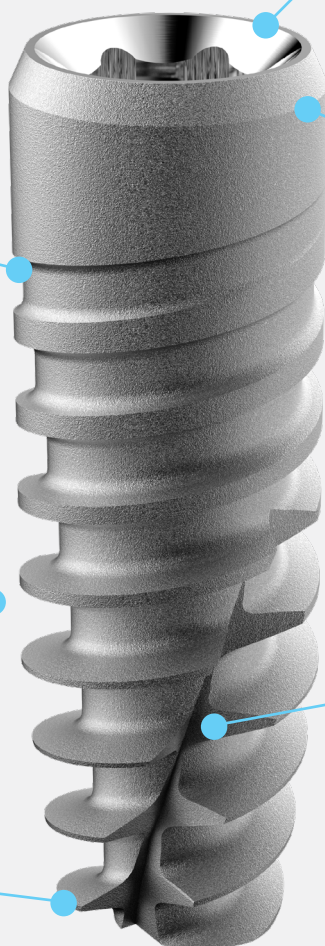

Spire taglienti



Alta stabilità primaria

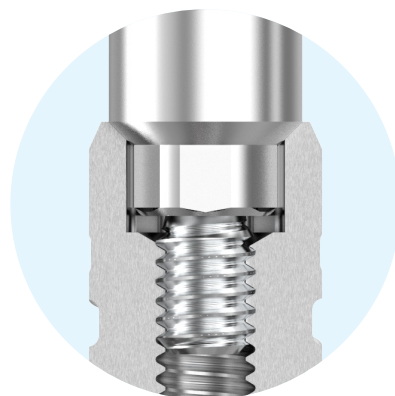

Connessione
sicura e precisa

	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 3,3 	10 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF33100N2000
	11,5 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF33115N2000
	13 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF33130N2000
	15 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF33150N2000
Ø 3,75 	8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF37080N2000
	10 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF37100N2000
	11,5 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF37115N2000
	13 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF37130N2000
	15 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF37150N2000
Ø 4,2 	8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF42080N2000
	10 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF42100N2000
	11,5 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF42115N2000
	13 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF42130N2000
	15 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	AIF42150N2000
Ø 5,0 	8 mm	Ø 4,1 mm	Ø 3,5 mm	AIF50080N2000
	10 mm	Ø 4,1 mm	Ø 3,5 mm	AIF50100N2000
	11,5 mm	Ø 4,1 mm	Ø 3,5 mm	AIF50115N2000
	13 mm	Ø 4,1 mm	Ø 3,5 mm	AIF50130N2000
	15 mm	Ø 4,1 mm	Ø 3,5 mm	AIF50150N2000








REGULAR Platform

RP



Procedura di posizionamento

AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

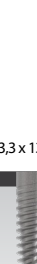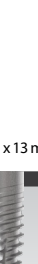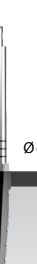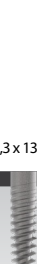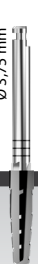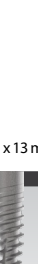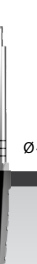	Lanceolata	Ø 2,2 mm	Ø 2,8 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,0 mm
Osso D3-D4							
	Ø 3,3 x 13 mm	Ø 3,75 x 13 mm	Ø 4,2 x 13 mm	Ø 5,0 x 13 mm			
	800/1000 rpm	500 rpm	150 rpm	Preparazione STANDARD			
Osso D1-D2							
	Ø 3,3 x 13 mm	Ø 3,75 x 13 mm	Ø 4,2 x 13 mm	Ø 5,0 x 13 mm			
	800/1000 rpm	500 rpm	150 rpm	Preparazione STANDARD			
	800/1000 rpm	Max 70 rpm	Preparazione TISSUE HEALING CONCEPT (THC)				

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).



Linee Implantari
Esagono Interno

Cyroth

BONE PLATFORM SWITCHING

La particolare morfologia del colletto consente di aumentare la superficie di contatto con l'osso e di preservare una quota maggiore di periostio. La parte conica coronale permette un contatto meno traumatico, con ridotta pressione sulla corticale creatale, evitando pericolose compressioni sui vasi sanguigni.

PROFILO

Il profilo a pareti parallele auto-filettanti è molto versatile e particolarmente indicato su osso denso.

FRESATURE APICALI

Rendono l'impianto auto maschiante e contribuiscono a creare stabilità primaria.

PIATTAFORMA UNICA


La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PLATFORM SWITCHING


La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso creatale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

PUNTA CONICA


La parte apicale estremamente conica rende possibili siti sottopreparati nell'osso più morbido.

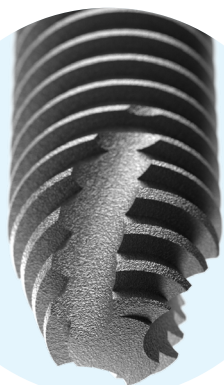

Spire taglienti

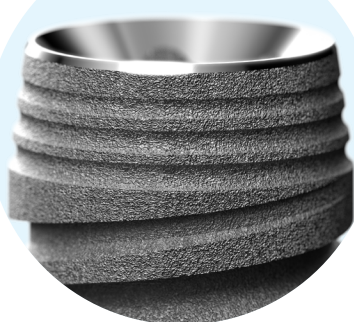


Alta stabilità primaria

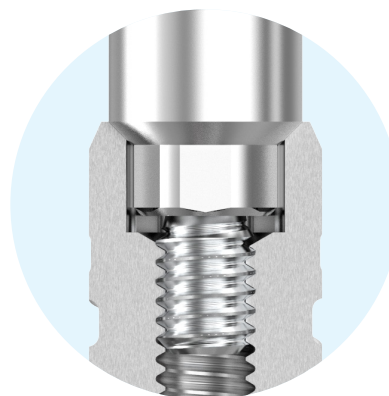

Connessione
sicura e precisa


	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 3,3 	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY33100NP00I
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY33115NP00I
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY33130NP00I
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY33150NP00I
	17 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY33170NP00I
Ø 3,75 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY37080NP00I
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY37100NP00I
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY37115NP00I
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY37130NP00I
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY37150NP00I
Ø 4,0 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY40080NP00I
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY40100NP00I
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY40115NP00I
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY40130NP00I
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY40150NP00I
Ø 4,5 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY45080NP00I
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY45100NP00I
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY45115NP00I
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY45130NP00I
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	ACY45150NP00I
Ø 5,0 	8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY50080NP00I
	10 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY50100NP00I
	11,5 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY50115NP00I
	13 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY50130NP00I
	15 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY50150NP00I
Ø 6,0 	17 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY50170NP00I
	8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY60080NP00I
	10 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY60100NP00I
	11,5 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY60115NP00I
	13 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	ACY60130NP00I

RP REGULAR Platform

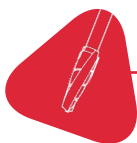


Procedura di posizionamento

AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

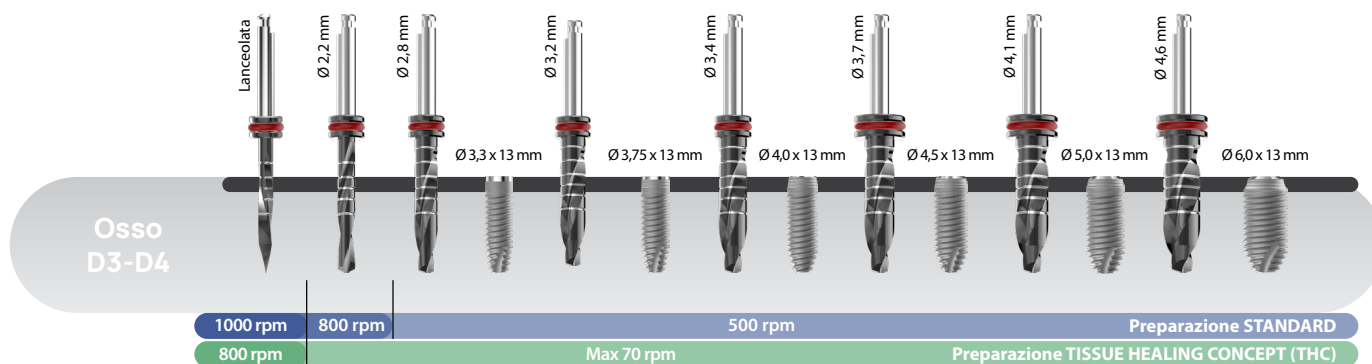

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

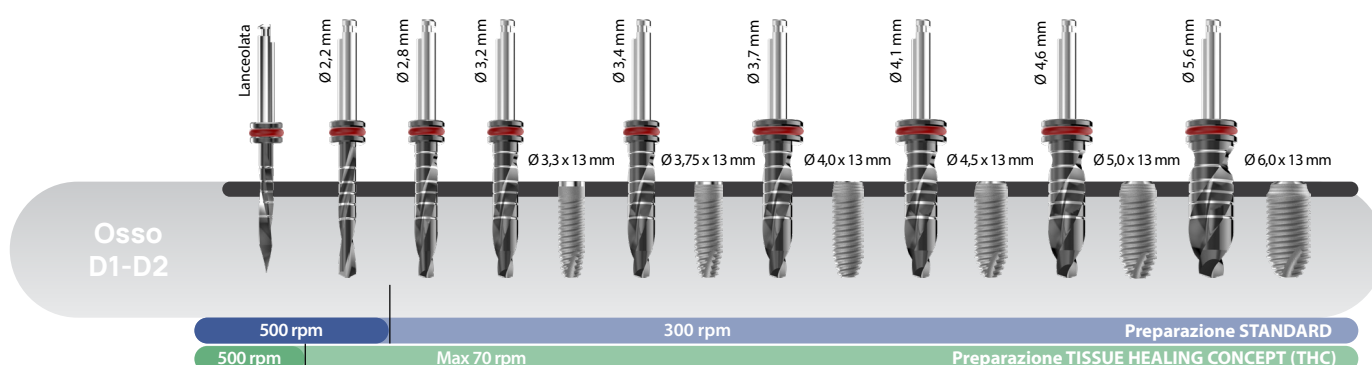

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

Nel kit chirurgico sono presenti gli stop di misura per agevolare il protocollo di fresaggio.

Linee Implantari
Esagono Interno




Cyroth Short

PIATTAFORMA UNICA

La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PROFILO

Il profilo a pareti parallele aiuta a trovare la stabilità in pochi millimetri d'osso.

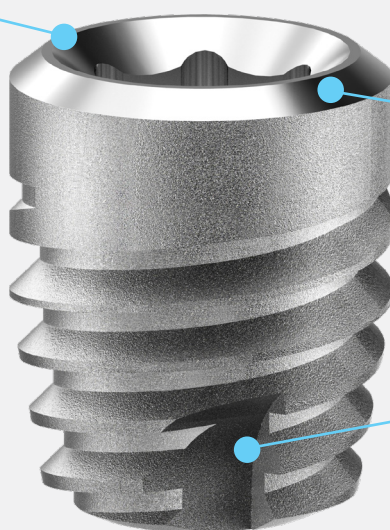


PLATFORM SWITCHING


La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso creale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

FRESATURE APICALI


Rendono l'impianto auto-maschiante e contribuiscono a creare stabilità primaria.

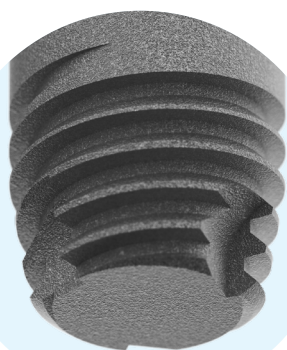

Apice safe

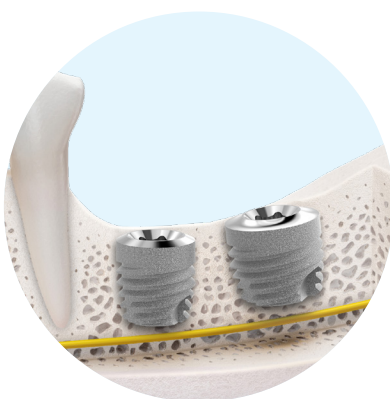

Ideale per carenza di osso

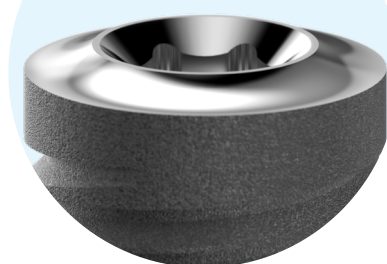

Connessione
sicura e precisa

	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 4,0 	5,5 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	 ACY40055NP001 ACY40070NP001
	7 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	
Ø 4,5 	5,5 mm	Ø 3,6 mm	Ø 3,5 mm	 ACY45055NP001 ACY45070NP001
	7 mm	Ø 3,6 mm	Ø 3,5 mm	
Ø 5,0 	5,5 mm	Ø 4,2 mm	Ø 3,5 mm	 ACY50055NP001 ACY50070NP001
	7 mm	Ø 4,2 mm	Ø 3,5 mm	
Ø 6,0 	5,5 mm	Ø 5,2 mm	Ø 3,5 mm	 ACY60055NP001 ACY60070NP001
	7 mm	Ø 5,2 mm	Ø 3,5 mm	


REGULAR Platform

RP



Procedura di posizionamento

AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

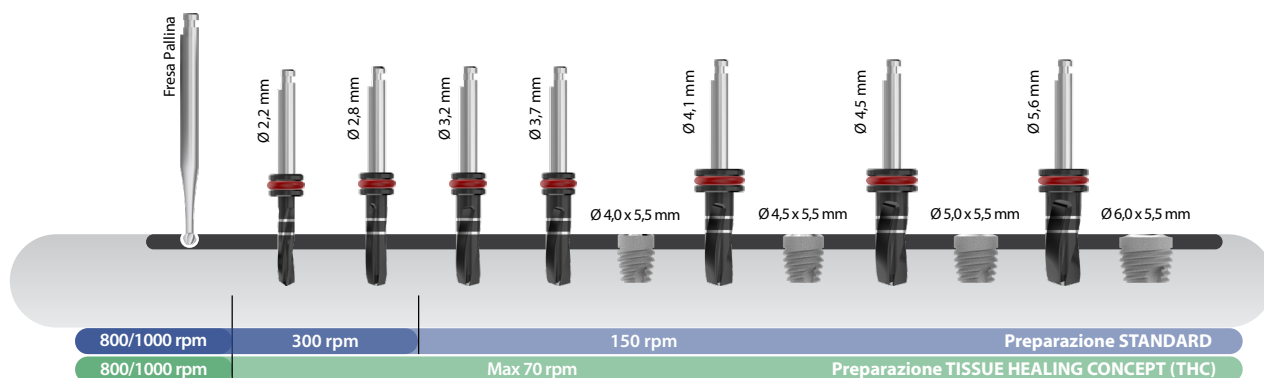

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

Nota: in caso di osso D3-D4 valutare se effettuare una sottopreparazione dimensionale.

Nel kit chirurgico sono presenti gli stop di misura per agevolare il protocollo di fresaggio.



Stop h=5mm e h=7mm per frese dedicate:
Ø 2,2 mm - Ø 2,8 mm - Ø 3,2 mm - Ø 3,4 mm



Stop h=5mm e h=7mm per prese dedicate:
Ø 3,7 mm - Ø 4,1 mm - Ø 4,6 mm - Ø 5,6 mm



Linee Implantari
Esagono Interno

Karo

DOPPIA SPIRA

Il filetto della fixture ha una spirale a due principi, che fa in modo che ad ogni giro la vite avanzi il doppio di una fixture a filetto classico.

FRESATURE APICALI

Rendono l'impianto auto-maschiante e contribuiscono a creare stabilità primaria.

PIATTAFORMA UNICA



La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PLATFORM SWITCHING


La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso creale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

PROFILO


Il profilo troncoconico offre notevoli vantaggi in molte situazioni critiche.

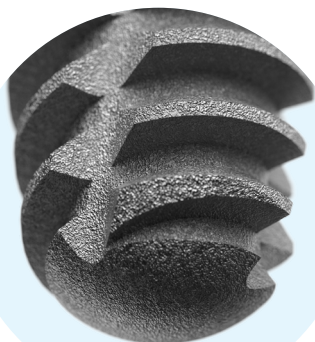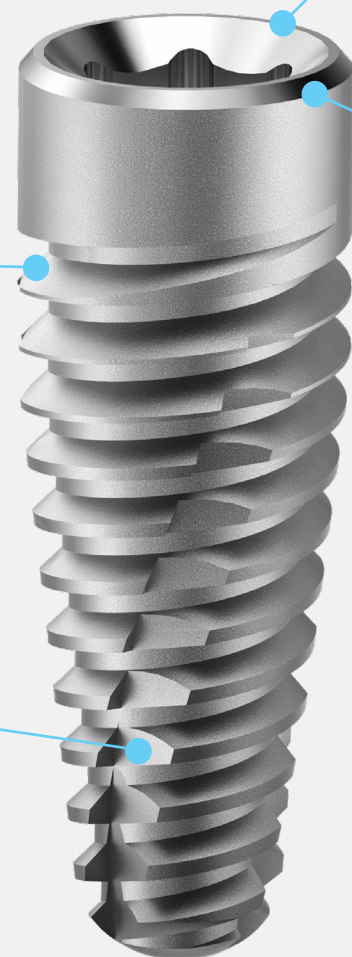

Punta arrotondata

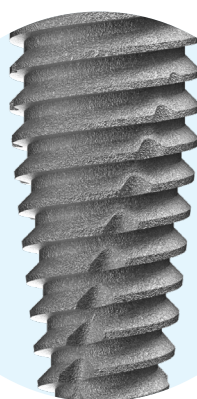

Spira a doppio principio

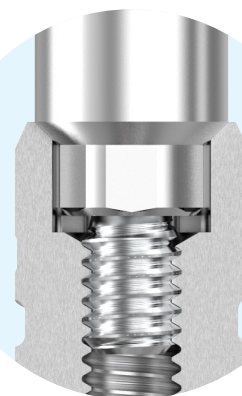

Connessione sicura e precisa


	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 3,3 	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA33100NP00I
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA33115NP00I
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA33130NP00I
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA33150NP00I
Ø 4,0 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA40080NP00I
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA40100NP00I
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA40115NP00I
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA40130NP00I
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AKA40150NP00I
Ø 5,0 	8 mm	Ø 3,35 mm	Ø 3,5 mm	AKA50080NP00I
	10 mm	Ø 3,35 mm	Ø 3,5 mm	AKA50100NP00I
	11,5 mm	Ø 3,35 mm	Ø 3,5 mm	AKA50115NP00I
	13 mm	Ø 3,35 mm	Ø 3,5 mm	AKA50130NP00I
	15 mm	Ø 3,35 mm	Ø 3,5 mm	AKA50150NP00I

RP REGULAR Platform



Procedura di posizionamento

AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

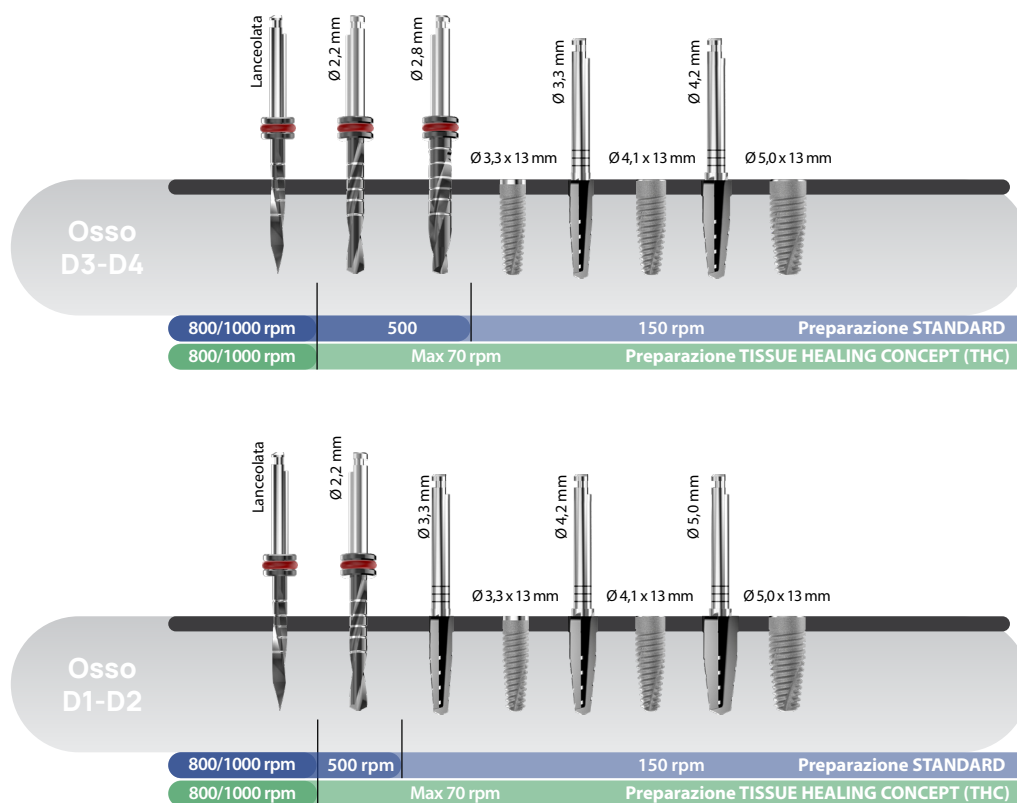

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).



Linee Implantari
Esagono Interno

IS-TWO

SPIRA PROGRESSIVA

La spira ha un andamento progressivo apico-coronale. Questa durante la fase di avvitamento genera una compattazione orizzontale della midollare, migliorando la stabilità primaria. (Ideale su osso D3-D4)

PROFILO

Il profilo troncoconico offre notevoli vantaggi in molte situazioni critiche.

SPIRA APICALE TAGLIENTE

Conferisce all'impianto capacità autofilettante e automaschiante.

PIATTAFORMA UNICA

La connessione protesica unica per tutti i diametri agevola l'operatore semplificando la gestione e offre la massima flessibilità al sistema.

PLATFORM SWITCHING

La rastrematura convergente della parte coronale favorisce la conservazione dell'osso crestale assicurando un'estetica costante del contorno gengivale e stabilizzando i tessuti molli.

SCANALATURE APICALI


Rendono l'impianto automaschiante e contribuiscono al recupero di frammenti ossei misti a sangue e fattori di crescita di origine midollare.



Spire taglienti




Alta stabilità primaria

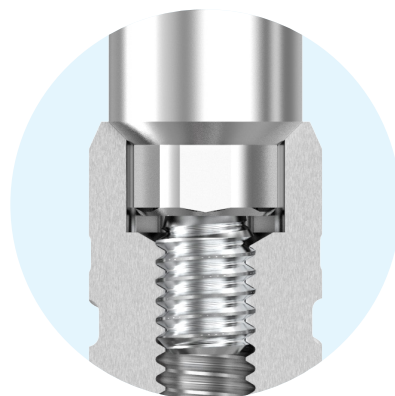

Connessione
sicura e precisa


	Lunghezza	Ø Punta	Ø Piattaforma	Codice prodotto
Ø 4,1 	8 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AIT41080NP000
	10 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AIT41100NP000
	11,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AIT41115NP000
	13 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AIT41130NP000
	15 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AIT41150NP000
	17 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	AIT41170NP000
Ø 5,0 	8 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	AIT50080NP000
	10 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	AIT50100NP000
	11,5 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	AIT50115NP000
	13 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	AIT50130NP000
	15 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	AIT50150NP000
	17 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	AIT50170NP000

RP REGULAR Platform

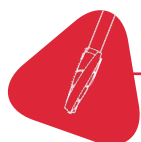


Procedura di posizionamento

AVVERTENZE: i drill presenti nel kit sono riutilizzabili. Si raccomanda la loro sostituzione dopo 20/30 utilizzi oppure quando diminuisce l'efficienza del taglio.

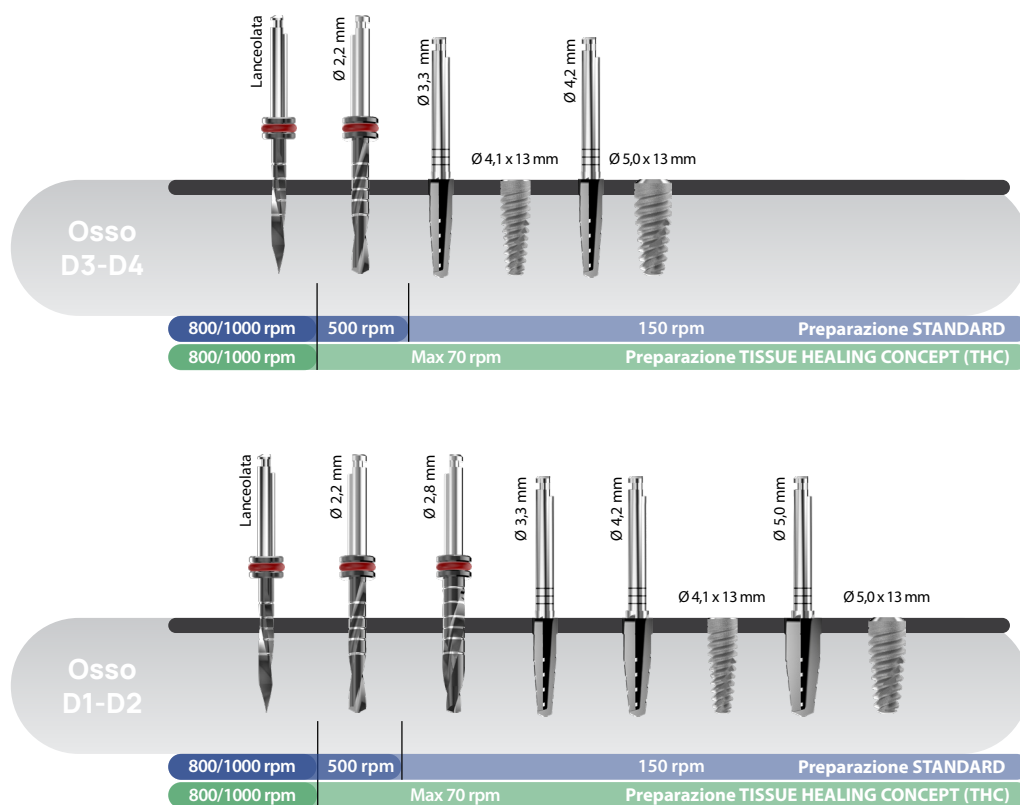

- **Preparazione Standard:** viene considerata una velocità minima di 150 giri/minuto e abbondante irrigazione.
- **Preparazione a bassi giri THC:** preparare senza irrigazione e con una velocità NON oltre i 70 giri/min (ad eccezione della fresa Lanceolata).

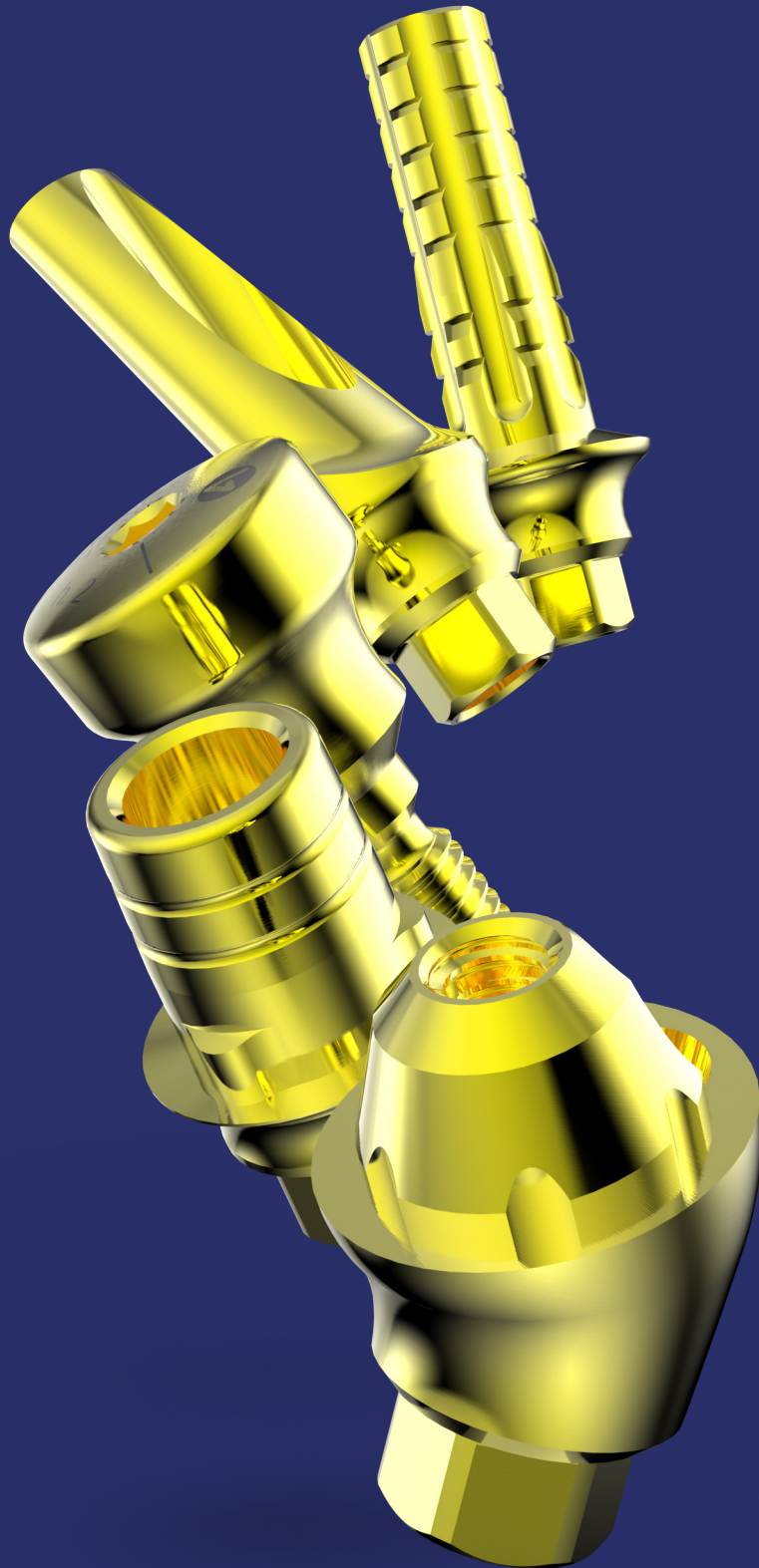

Opzioni protesiche



La linea protesica AON implants, grazie ai profili S-Line, permette di dare più spazio alla crescita dei tessuti molli. L'ampiezza della gamma garantisce al clinico la massima versatilità per ottenere risultati estetici di eccellenza.

Il materiale per la realizzazione delle componenti protesiche è la lega di titanio grado 5. Alcune di esse vengono sottoposte ad un processo di colorazione tramite ossidazione.


NB: l'azienda raccomanda agli utilizzatori di utilizzare solamente componenti originali per protesizzare i propri impianti dentali, in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche meccaniche che contraddistinguono i Sistemi AON Implants.

L'azienda non risponderà in caso vengano utilizzati componenti non originali.

Protesica **Generale**

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
	Vite di guarigione Narrow NP <i>Torque max 20 Ncm</i>	Altezza H. 1 mm Altezza H. 2 mm Altezza H. 3 mm Altezza H. 4 mm	Diametro Ø 4 Diametro Ø 4 Diametro Ø 4 Diametro Ø 4
			AVG330100000B AVG330200000B AVG330300000B AVG330400000B
	Vite di guarigione stretta <i>Torque max 20 Ncm</i>	Altezza H. 1 mm Altezza H. 2 mm Altezza H. 3 mm Altezza H. 4 mm Altezza H. 5 mm	Diametro Ø 3,5 Diametro Ø 3,5 Diametro Ø 3,5 Diametro Ø 3,5 Diametro Ø 3,5
			AVG35010SR00B AVG35020SR00B AVG35030SR00B AVG35040SR00B AVG35050SR00B
	Vite di guarigione normale <i>Torque max 20 Ncm</i>	Altezza H. 1 mm Altezza H. 2 mm Altezza H. 3 mm Altezza H. 4 mm Altezza H. 5 mm	Diametro Ø 4,5 Diametro Ø 4,5 Diametro Ø 4,5 Diametro Ø 4,5 Diametro Ø 4,5
			AVG350100000B AVG350200000B AVG350300000B AVG350400000B AVG350500000B
	Vite di guarigione larga <i>Torque max 20 Ncm</i>	Altezza H. 1 mm Altezza H. 2 mm Altezza H. 3 mm Altezza H. 4 mm Altezza H. 5 mm	Diametro Ø 5,3 Diametro Ø 5,3 Diametro Ø 5,3 Diametro Ø 5,3 Diametro Ø 5,3
			AVG35010LA00B AVG35020LA00B AVG35030LA00B AVG35040LA00B AVG35050LA00B
	Analogo Narrow NP		AAN330000000B
DW 	Analogo digitale esagono interno Narrow NP		AAD330000000B
	Analogo standard		AAN350000000B
DW 	Analogo digitale esagono interno		AAD350000000B

DW → **Digital Workflow:** componenti protesiche presenti nelle librerie digitali.

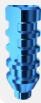	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
	Transfer Narrow NP Torque max 20 Ncm	H. 12 mm Diametro Ø 3,2	ATR330000IP00B
	Transfer Torque max 25 Ncm	H. 12 mm	ATR350000IP00B
	Transfer short	H. 9 mm	ATR35SHOIP00B
	Transfer a strappo	H. 12 mm	ATR350000IR00B
	Transfer a strappo short	H. 9 mm	ATR35SHOIR00B
	Transfer slim		ATR35SLIIP00B
	Transfer slim a strappo		ATR35SLIIR00B
	Transfer 2 pezzi	Lungo: 14mm Corto: 10mm	ATR35LNGSN00B ATR35SHOSN00B



Protesica **Provvisorio**

Descrizione		Opzioni /	Diametri /	Altezze	Codice prodotto
	Moncone provvisorio in Titanio	Non rotante	Ø 4,5	H. 1 mm	AMO35010PTNRB
		Non rotante	Ø 4,5	H. 2 mm	AMO35020PTNRB
		Non rotante	Ø 4,5	H. 3 mm	AMO35030PTNRB
		Non rotante	Ø 5,3	H. 1 mm	AMO3501WPTNRB
		Non rotante	Ø 5,3	H. 2 mm	AMO3502WPTNRB
		Non rotante	Ø 5,3	H. 3 mm	AMO3503WPTNRB
Torque max 20 Ncm					
	Moncone provvisorio in Titanio	Rotante	Ø 4,5	H. 1 mm	AMO35010PTROB
		Rotante	Ø 4,5	H. 2 mm	AMO35020PTROB
		Rotante	Ø 4,5	H. 3 mm	AMO35030PTROB
		Rotante	Ø 5,3	H. 1 mm	AMO3501WPTROB
		Rotante	Ø 5,3	H. 2 mm	AMO3502WPTROB
		Rotante	Ø 5,3	H. 3 mm	AMO3503WPTROB
Torque max 20 Ncm					
	Moncone provvisorio in Titanio - Narrow	Non rotante	Ø 4,0	H. 1 mm	AMO33010PTNRB
		Non rotante	Ø 4,0	H. 2 mm	AMO33020PTNRB
		Non rotante	Ø 4,0	H. 3 mm	AMO33030PTNRB
Torque max 20 Ncm					
	Moncone provvisorio in Titanio - Narrow	Rotante	Ø 4,0	H. 1 mm	AMO33010PTROB
		Rotante	Ø 4,0	H. 2 mm	AMO33020PTROB
		Rotante	Ø 4,0	H. 3 mm	AMO33030PTROB
Torque max 20 Ncm					
	Moncone provvisorio in PEEK		Ø 3,5		AMO35110PE00B
	Moncone provvisorio in PEEK - Narrow		Ø 3,2		AMO33110PE00B


Protesica **Zirconia**

	Descrizione	Opzioni /	Diametri /	Altezze	Codice prodotto
	Moncone per zirconia	Rotante		H. 10 mm	AMO00100ZRROB
		Non rotante		H. 10 mm	AMO00100ZRNRB

Protesica T-BASE

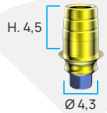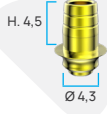	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
 	T-BASE - Narrow 	Non rotante Ø 4,3 H. 0,5 mm	ALS3300500NRB
		Non rotante Ø 4,3 H. 1,5 mm	ALS3301500NRB
		Non rotante Ø 4,3 H. 3,0 mm	ALS3303000NRB
		Rotante Ø 4,3 H. 0,5 mm	ALS3300500ROB
		Rotante Ø 4,3 H. 1,5 mm	ALS3301500ROB
		Rotante Ø 4,3 H. 3,0 mm	ALS3303000ROB
 	T-BASE - standard	Non rotante Ø 4,3 H. 0,5 mm	ALS0000500NRB
		Non rotante Ø 4,3 H. 1,5 mm	ALS0001500NRB
		Non rotante Ø 4,3 H. 3,0 mm	ALS0003000NRB
		Rotante Ø 4,3 H. 0,5 mm	ALS0000500ROB
		Rotante Ø 4,3 H. 1,5 mm	ALS0001500ROB
		Rotante Ø 4,3 H. 3,0 mm	ALS0003000ROB
 	T-BASE - Largo	Non rotante Ø 5,0 H. 0,5 mm	ALS5000500NRB
		Non rotante Ø 5,0 H. 1,5 mm	ALS5001500NRB
		Non rotante Ø 5,0 H. 3,0 mm	ALS5003000NRB
		Rotante Ø 5,0 H. 0,5 mm	ALS5000500ROB
		Rotante Ø 5,0 H. 1,5 mm	ALS5001500ROB
		Rotante Ø 5,0 H. 3,0 mm	ALS5003000ROB

Protesica 3POD

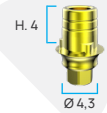	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
 	Link 3POD MUA <i>Torque max 20 Ncm</i>	H. spalla: 1,3 mm	ALINB00000000
 	Link da incollaggio	Non rotante H. 0,5 mm	ALI0000500NRB
		Rotante H. 0,5 mm	ALI0000500ROB
		Non rotante H. 1,5 mm	ALI0001500NRB
		Rotante H. 1,5 mm	ALI0001500ROB
		Non rotante H. 3,0 mm	ALI0003000NRB
		Rotante H. 3,0 mm	ALI0003000ROB
 	Scanbody MUA		ASBNB00000PP0
 	Scanbody diretto EI Narrow 	Diametro Ø 3,2 mm	ASB330000000B
 	Scanbody diretto EI Standard	Diametro Ø 3,5 mm	ASB0000000PPB
 	Transfer 3POD lungo		ALI00000TR000

 → **Digital Workflow:** componenti protesiche presenti nelle librerie digitali.



Transfer 3POD short

ALI00SHOTR000



Calcinabile 3POD

ALI00000CA000

Protesica Cementata

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
 H. 10	Moncone Dritto Narrow NP	Ø 4,0 H. 1 mm	AMO33010ST00B
		Ø 4,0 H. 2 mm	AMO33020ST00B
		Ø 4,0 H. 3 mm	AMO33030ST00B
 H. 10	Moncone Dritto stretto	Ø 3,5 H. 11 mm	AMO35110DS00B
 H. 10	Moncone Dritto	Ø 4,5 H. 1 mm	AMO35010ST00B
		Ø 4,5 H. 2 mm	AMO35020ST00B
		Ø 4,5 H. 3 mm	AMO35030ST00B
 H. 10	Moncone Dritto largo	Ø 5,3 H. 1 mm	AMO35010DL00B
		Ø 5,3 H. 2 mm	AMO35020DL00B
		Ø 5,3 H. 3 mm	AMO35030DL00B
 H. 10	Moncone Angolato Narrow NP	Ang. 10° Ø 4,0 H. 1 mm	AMO33010IN10B
		Ang. 10° Ø 4,0 H. 2 mm	AMO33020IN10B
		Ang. 20° Ø 4,0 H. 1 mm	AMO33010IN20B
		Ang. 20° Ø 4,0 H. 2 mm	AMO33020IN20B
 H. 10	Moncone Angolato	Ang. 15° Ø 4,5 H. 1 mm	AMO35010IN15B
		Ang. 15° Ø 4,5 H. 2 mm	AMO35020IN15B
		Ang. 15° Ø 4,5 H. 3 mm	AMO35030IN15B
		Ang. 25° Ø 4,5 H. 1 mm	AMO35010IN25B
		Ang. 25° Ø 4,5 H. 2 mm	AMO35020IN25B
		Ang. 25° Ø 4,5 H. 3 mm	AMO35030IN25B
 H. 10	Moncone Calcinabile Narrow NP	Non rot. Ø 3,2	AMO33000CANRB
		Rotante Ø 3,2	AMO33000CAROB
 H. 10	Moncone Calcinabile slim	Non rot. Ø 3,5	AMO35SLICANRB
		Rotante Ø 3,5	AMO35SLICAROB
 H. 10	Moncone Calcinabile base Co-Cr	Non rot. Ø 4,0	AMO35000UCNRB
		Rotante Ø 4,0	AMO35000UCROB
 H. 10	Moncone Calcinabile base Co-Cr - Narrow NP	Non rot. Ø 4,0	AMO33000UCNRB
		Rotante Ø 4,0	AMO33000UCROB

Protesica Avvitata

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto	
DW	 Moncone Multy Utility dritto NB - Narrow NP Torque max 30 Ncm	H. 1 mm H. 2 mm H. 3 mm H. 4 mm	AMUNBP10ST00B AMUNBP20ST00B AMUNBP30ST00B AMUNBP40ST00B	
DW	 Moncone Multy Utility dritto NB Torque max 35 Ncm	H. 1 mm H. 2 mm H. 3 mm H. 4 mm	AMUNB010ST00B AMUNB020ST00B AMUNB030ST00B AMUNB040ST00B	
DW	 Moncone Multy Utility angolato NB - Narrow NP Torque max 20 Ncm	Ang. 17° Ang. 17° Ang. 30° Ang. 30°	H. 2 mm H. 3 mm H. 3 mm H. 4 mm	AMUNBP20IN17B AMUNBP30IN17B AMUNBP30IN30B AMUNBP40IN30B
DW	 Moncone Multy Utility angolato NB Torque max 25 Ncm	Ang. 17° Ang. 17° Ang. 30° Ang. 30°	H. 2 mm H. 3 mm H. 3 mm H. 4 mm	AMUNB020IN17B AMUNB030IN17B AMUNB030IN30B AMUNB040IN30B
	 Vite di guarigione Multy Utility NB Torque max 15 Ncm	H. 3 mm H. 5 mm	AMUNB030CG000 AMUNB050CG000	
DW	 Cappetta incollaggio Multy Utility NB Torque max 15 Ncm	H. 10	AMUNB000CL000	
	 Moncone provvisorio Multy Utility NB Torque max 15 Ncm	H. 10	AMUNB000PT000	
DW	 Analogo Multy Utility NB Digitale		AADNB000AD000	
	 Analogo Multy Utility Standard		AMUNB000AD000	
	 Transfer impronta Multy Utility NB		AMUNB000TM000	

DW → **Digital Workflow:** componenti protesiche presenti nelle librerie digitali.

Protesica **Overdenture**

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
	Moncone a sfera per overdenture Narrow	NP Diametro sfera Ø 2,5 Diametro sfera Ø 2,5 Diametro sfera Ø 2,5	H. 2 mm AMO33020OVA4B
			H. 3 mm AMO33030OVA4B
			H. 4 mm AMO33040OVA4B
			Torque max 30 Ncm
	Moncone a sfera per overdenture	Diametro Ø 2,5	H. 1 mm AMO35010OVA4B
			H. 2 mm AMO35020OVA4B
			H. 3 mm AMO35030OVA4B
			H. 4 mm AMO35040OVA4B
			H. 5 mm AMO35050OVA4B
			H. 6 mm AMO35060OVA4B
	AON LOCK - Narrow NP		H. 1 mm ALK330100000B
			H. 2 mm ALK330200000B
			H. 3 mm ALK330300000B
			H. 4 mm ALK330400000B
	AON LOCK		H. 1 mm ALK350100000B
			H. 2 mm ALK350200000B
			H. 3 mm ALK350300000B
			H. 4 mm ALK350400000B
			H. 5 mm ALK350500000B
			H. 6 mm ALK350600000B
			Torque max 35 Ncm



Ricambi

Ricambi protesica

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Altezze	Codice prodotto
	Cappette	Soft Rosa Normale trasparente Hard verde	AMO00025CVCS0 AMO00025CVCH0 AMO00025CVCN0
	Box	Inox	AMO00025CVCX0
	Dischetto		AMO000000CVDPO
	Vite protesica Narrow 		AVS330770000B
	Vite standard protesica	Filetto M 1,8	AVS00083000B
	Vite protesica ribassata	Filetto M 1,8	AVS00080000B
	Vite Multy Utility NB	Filetto M 1,4	AMUNB000VMIN0
	Vite Transfer lunga		AVR000000000B
	Vite Transfer corta		AVR00SHO0000B
	Vite Transfer Multy Utility	Altezza H. 15 mm	AMUNB150VR000
	Vite Transfer Multy Utility	Altezza H. 10 mm	AMUNB100VR000



Strumenti Ricambi Kit chirurgici




Pratico, facile da usare, completo: sono le caratteristiche del Kit chirurgico AON.

Comprende tutte le morfologie di frese, le chiavi manuali e da contrangolo, i pin di posizionamento, cricchetto dinamometrico e cacciavite.




Kit chirurgico Standard




I kit chirurgici AON sono stati studiati per offrire la massima praticità e semplicità d'uso. Sono compatti e contengono tutti gli accessori utili ad eseguire diverse tipologie di intervento. Tutto a portata di mano, sicuri e sterilizzabili.

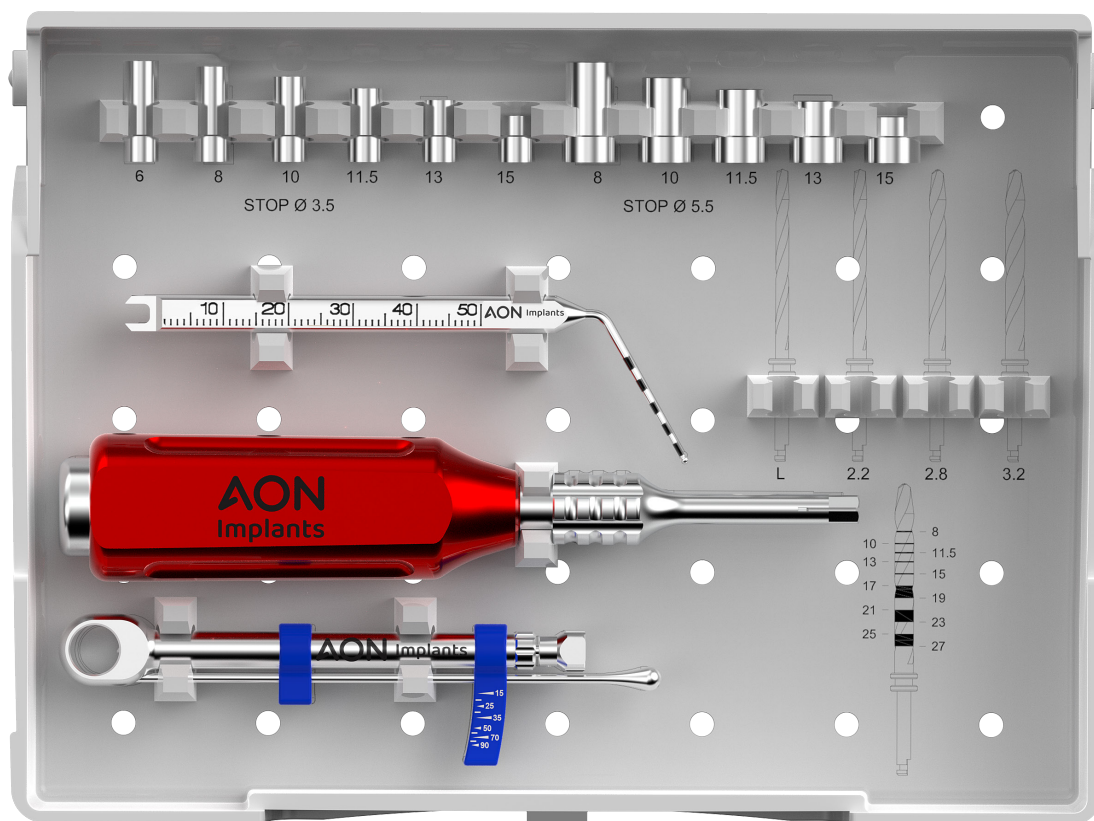


Configurazione Kit per impianto IS-FIVE

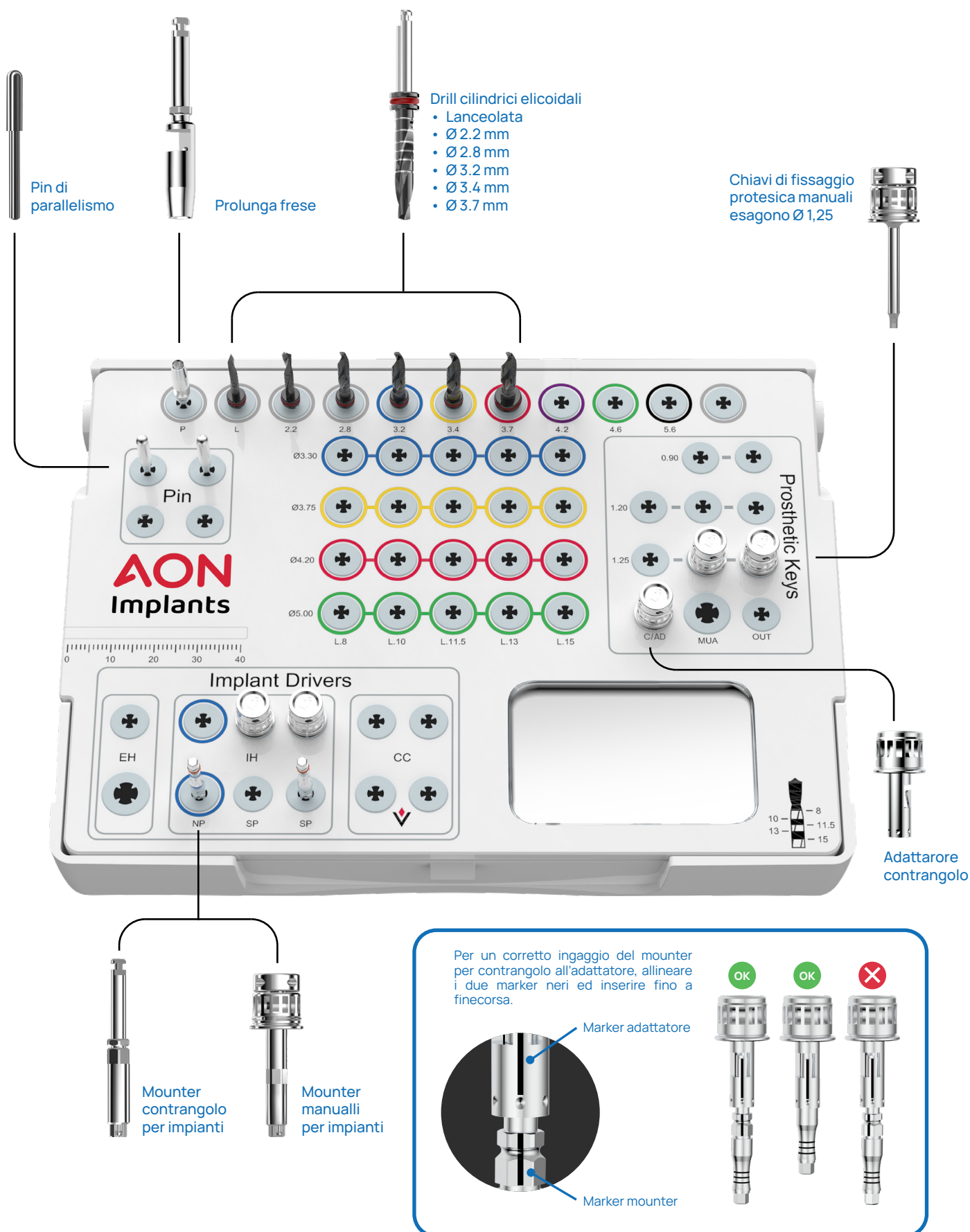

Configurazione Kit per impianto IS-FOUR

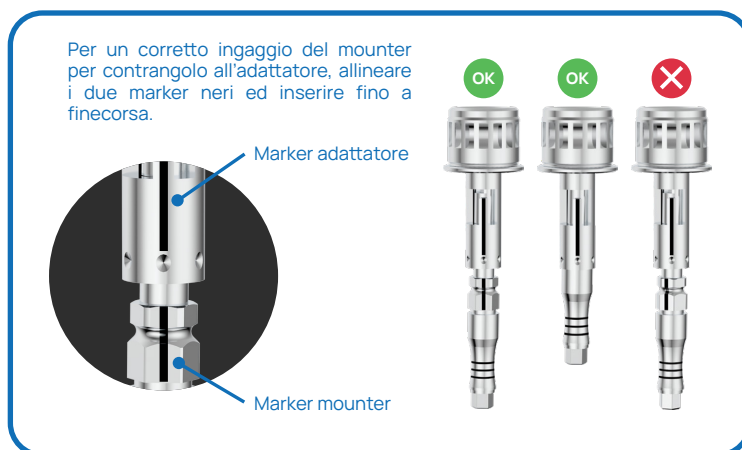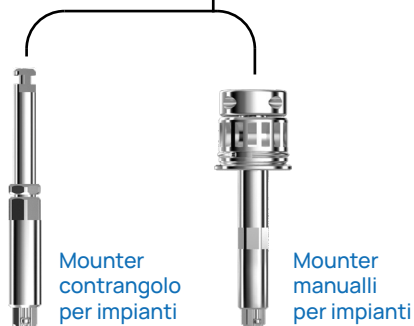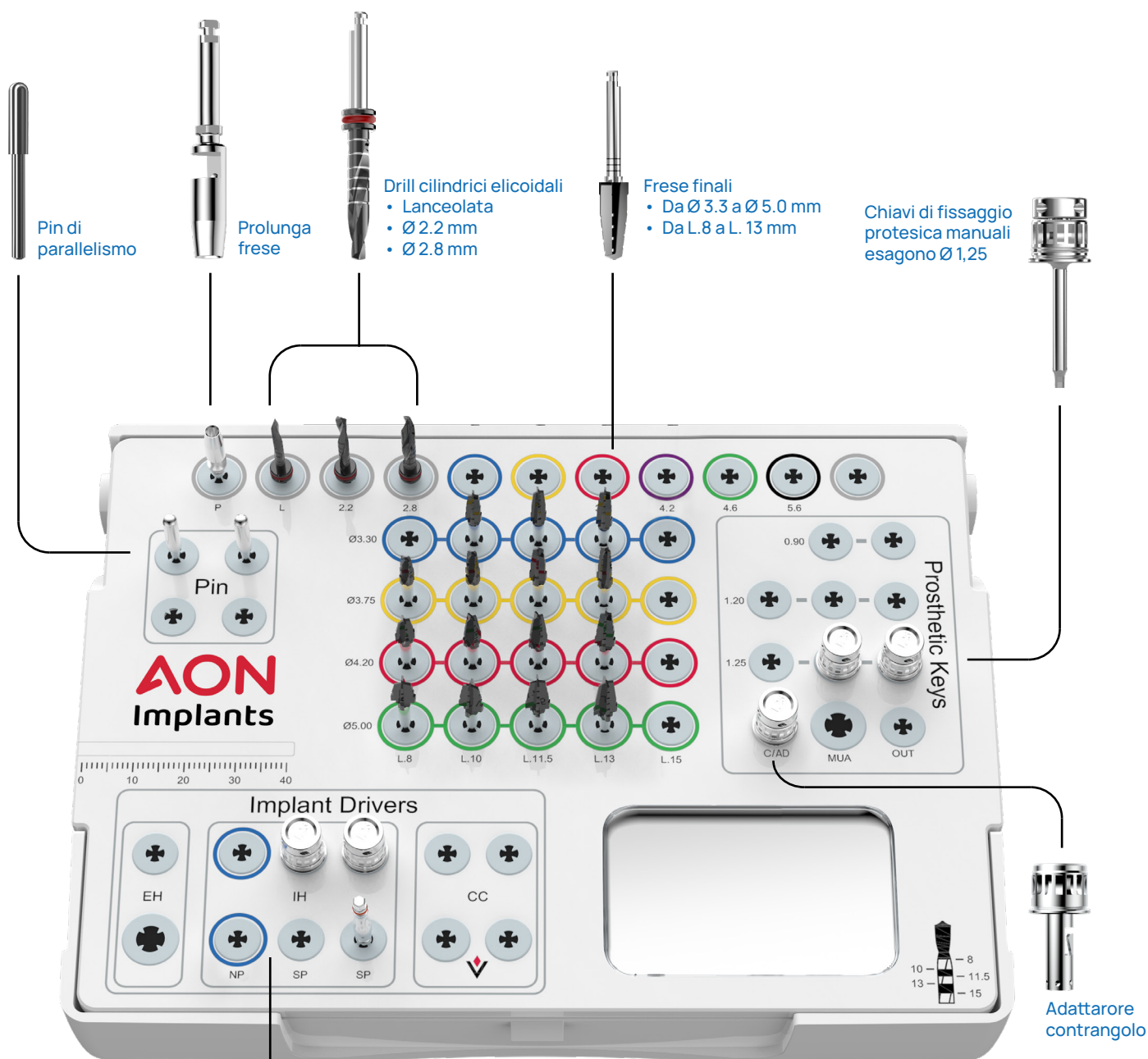

Configurazione Kit per impianto CYROTH

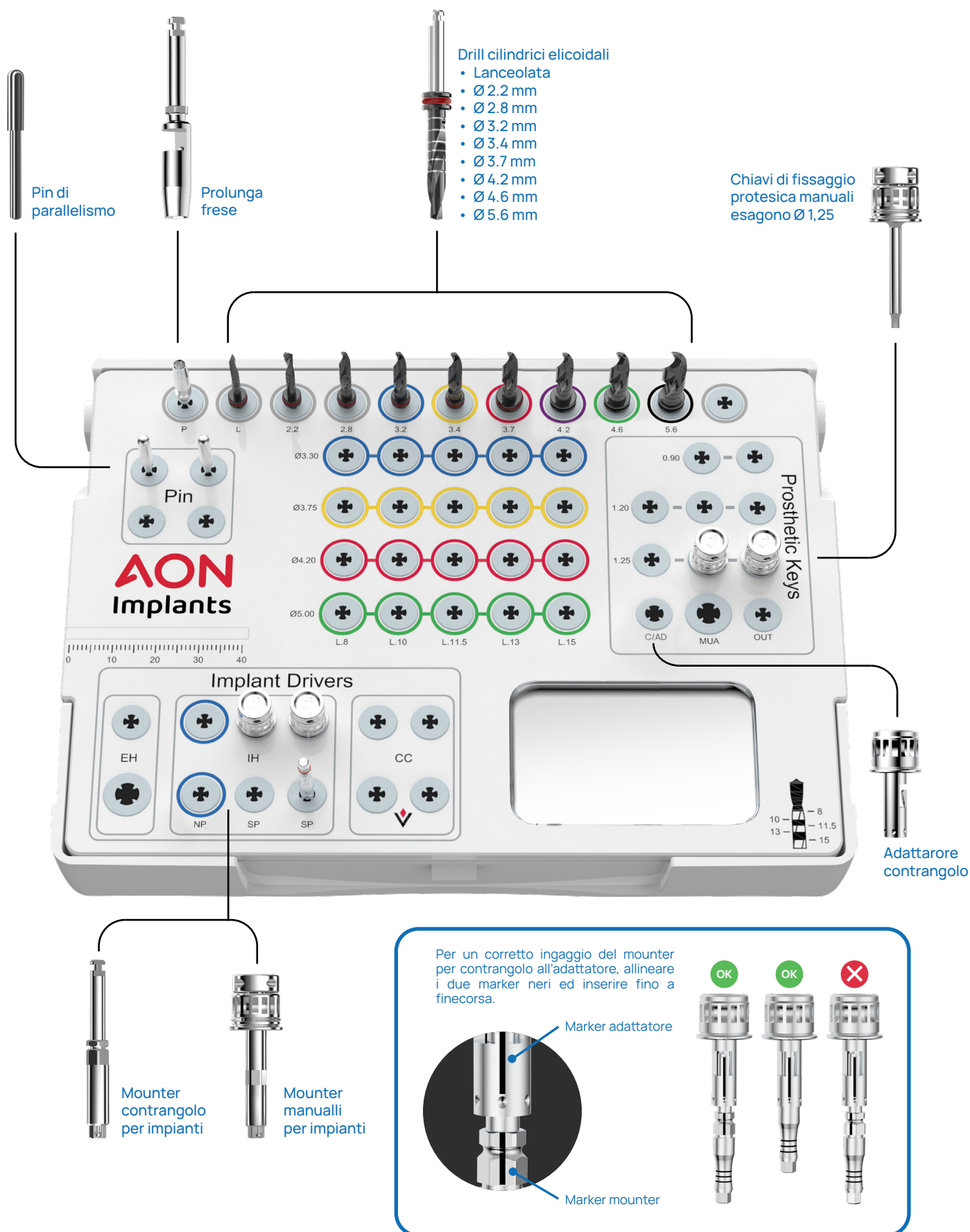

Frese e Stop

Descrizione

Opzioni / Diametri / Altezze

Codice prodotto



Fresa lanceolata

Universale

Diametro Ø 2 mm

AUN20000FRLLO



Drill cilindrico elicoidale

Diametro Ø 2,2 mm

AUN22000DR000

Diametro Ø 2,8 mm

AUN28000DR000

Diametro Ø 3,2 mm

AUN32000DR000

Diametro Ø 3,4 mm

AUN34000DR000

Diametro Ø 3,7 mm

AUN37000DR000

Diametro Ø 4,1 mm

AUN41000DR000

Diametro Ø 4,6 mm

AUN46000DR000

Diametro Ø 5,6 mm

AUN56000DR000



Drill cilindrico elicoidale
impianti short

Diametro Ø 2,2 mm

AUN22SHODR000

Diametro Ø 2,8 mm

AUN28SHODR000

Diametro Ø 3,2 mm

AUN32SHODR000

Diametro Ø 3,4 mm

AUN34SHODR000

Diametro Ø 3,7 mm

AUN37SHODR000

Diametro Ø 4,1 mm

AUN41SHODR000

Diametro Ø 4,6 mm

AUN46SHODR000

Diametro Ø 5,6 mm

AUN56SHODR000



Fresa finale
IS-FOUR

Diametro Ø 3,3 mm

H. 10 mm

AIF33100FRFIO

Diametro Ø 3,3 mm

H. 11,5 mm

AIF33115FRFIO

Diametro Ø 3,3 mm

H. 13 mm

AIF33130FRFIO

Diametro Ø 3,3 mm

H. 15 mm

AIF33150FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 8 mm

AIF37080FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 10 mm

AIF37100FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 11,5 mm

AIF37115FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 13 mm

AIF37130FRFIO

Diametro Ø 3,75 mm

H. 15 mm

AIF37150FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 8 mm

AIF42080FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 10 mm

AIF42100FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 11,5 mm

AIF42115FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 13 mm

AIF42130FRFIO

Diametro Ø 4,2 mm

H. 15 mm

AIF42150FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 8 mm

AIF50080FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 10 mm

AIF50100FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 11,5 mm

AIF50115FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 13 mm

AIF50130FRFIO

Diametro Ø 5,0 mm

H. 15 mm

AIF50150FRFIO



Stop Ø 3,5 mm

H. 5 mm

AUN3505000STO

H. 6 mm

AUN3506000STO

H. 7 mm

AUN3507000STO

H. 8 mm

AUN3508000STO

H. 10 mm

AUN3510000STO

H. 11,5 mm

AUN3511500STO

H. 13 mm

AUN3513000STO

H. 15 mm

AUN3515000STO



Stop Ø 5,5 mm

H. 5 mm

AUN5505000STO

H. 7 mm

AUN5507000STO

H. 8 mm

AUN5508000STO

H. 10 mm

AUN5510000STO

H. 11,5 mm

AUN5511500STO

H. 13 mm

AUN5513000STO

H. 15 mm


AUN5515000STO

Chiavi di fissaggio

	Descrizione	Opzioni / Diametri / Lunghezze	Codice prodotto
	Mounter manuale impianti extra-lunga	Lunghezza 19 mm	AST00LNGAPCRI
	Mounter manuale impianti lunga	Lunghezza 13 mm	AST00000APCRI
	Contrangolo impianti lunga Narrow	NP Lunghezza 14 mm	AST00160CMCAN
	Contrangolo impianti lunga	Lunghezza 14 mm	AST00160CBITK
	Contrangolo protesica lunga	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 14 mm Lunghezza 14 mm	AST12000APCAB AST00000PRCAI
	Contrangolo protesica corta	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 9 mm Lunghezza 9 mm	AST12SHOAPCAB AST00SHOCMCEK
	Fissaggio manuale protesica corta	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 8 mm	AST1BSHOAPCRB
	Fissaggio manuale protesica lunga	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 14 mm	AST1B000APCRB
	Fissaggio manuale protesica extra-lunga	Diametro Ø 1,20 Diametro Ø 1,25 Lunghezza 25 mm	AST12530APCRB
	Multy Utility NB dritto lunga	Lunghezza 14 mm	AST00000APCRE
	Multy Utility NB dritto corta	Lunghezza 8 mm	AST00SHOAPCRE
	Adattatore per contrangolo		AST00000APCRO

Strumenti


	Descrizione	Opzioni / Diametri	Codice prodotto
	Pin di parallelismo	Diametro Ø 2 mm	AST20000CCIP0
	Misuratore di profondità		AST00000SUIP0
	Cricchetto donamometrico		AST00000CCDN0
	Cacciavite ad inserti automatico		AST00000CTAT0
	Chiave inversa per estrazione monconi		AST00000CHIN0
	Prolunga per frese		AST000000PF0
	Guida posizionamento impianti		AST00000G4000

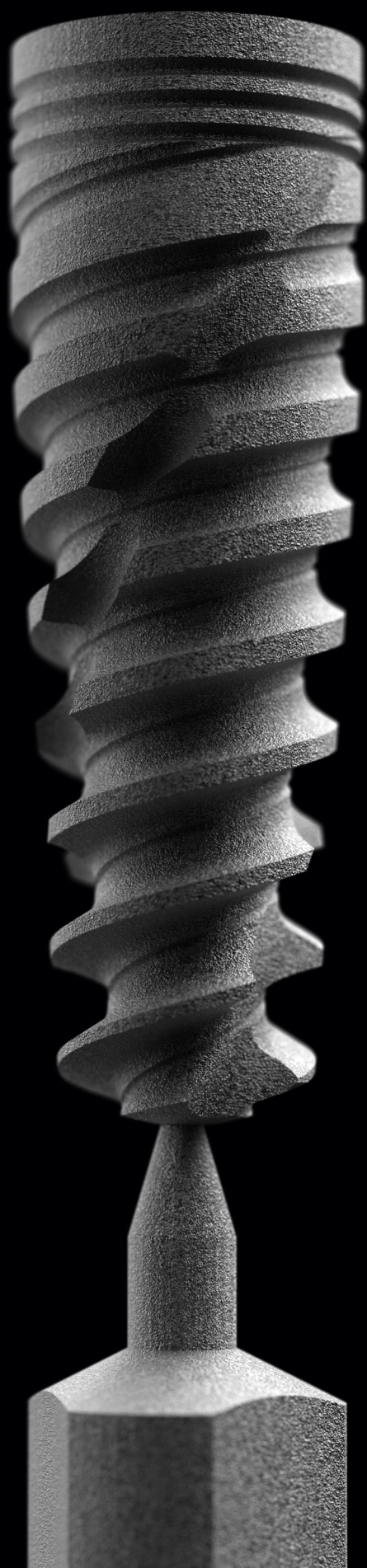

Impianto sospeso

Zero contatti
100% sicurezza

Packaging

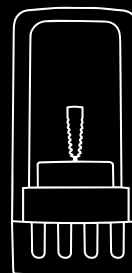

Sicurezza

A garanzia di una totale sterilità degli impianti abbiamo studiato una soluzione innovativa: grazie al suo peduncolo in titanio, l'impianto rimane sospeso all'interno del blister a doppio sigillo. E' possibile così prelevare dalla sua sede tramite il manipolo, evitando contatti con altri materiali.

Facile e leggibile.

Tutti i dati tecnici dell'impianto, quali modello, diametro, lunghezza e piattaforma sono riportati sulla scatolina, per una veloce e facile lettura.

Ogni cosa è stata pensata per un'esperienza intuitiva!





Guida apertura blister



Scansiona il QR Code per
vedere il video animato.



Sigillo di Garanzia

1

Tutti i nostri impianti sono dotati di sigillo di garanzia apposto sul blister esterno. Verificarne l'integrità.



Apertura del blister

2

Ruotare il tappo inferiore per rompere il sigillo ed aprire il blister esterno.



Estrazione blister interno

3

A questo punto sarà possibile estrarre il secondo blister contenente l'impianto.



Apertura blister interno

4


Rimuovendo il tappo inferiore dalla capsula superiore sarà possibile raggiungere l'impianto sospeso.



Posizionamento mounter

5

Utilizzare il contrangolo ed il mounter presente nel kit per agganciare la connessione dell'impianto, procedendo con cautela.

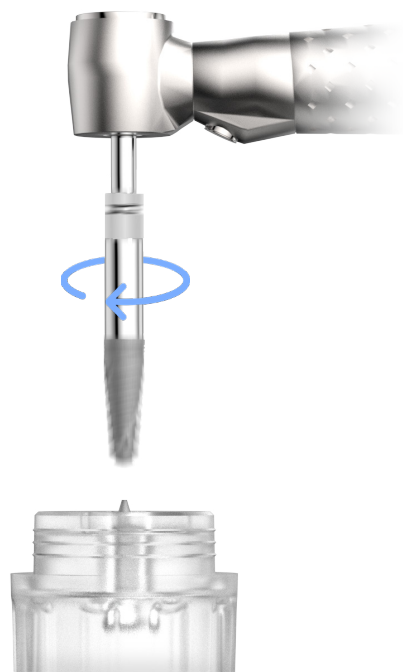

Estrazione impianto

6

Una volta agganciato l'impianto al mounter, sarà possibile azionare la rotazione del contrangolo per staccare l'impianto dalla base in titanio. **Max 20 rpm.**



Posizionamento implantare

7

Sarà ora possibile posizionare direttamente l'impianto nel sito implantare.



Vite tappo

8

Rimuovere il tappo tirando la parte inferiore della basetta dell'impianto per raggiungere la vite.



Estrazione vite

9

Ingaggiare la vite con la chiave manuale da Ø 1,25 presente nel Kit. Ruotare in senso antiorario per svitarla dal suo alloggiamento.



Info ed avvertenze



Studio del caso e progettazione

- Colloquio con il paziente per verificare esigenze ed aspettative.
- Esame clinico.
- Rx panoramica.
- Rx dental scan o Rx 3D cone beam.
- Nei casi in cui la radiologia tradizionale non sia sufficiente per pianificare l'intervento, sarà opportuno progettare sulla base dei dati TAC con programma dedicato di simulazione.
- Modelli studio e ceratura diagnostica.
- Dima chirurgica.



Criteri di esclusione temporanei

- Patologie locali e/o sistemiche di origine infettiva
- Febbre
- Stress psico-fisico
- Rinite virale o allergica
- Patologie dell'apparato respiratorio



Criteri di esclusione generali

- Diabete scompensato.
- Recente infarto miocardico e ictus.
- Pregresso o attuale trattamento con bifosfonati.
- Pazienti con aspettative estetiche non realizzabili.
- Pazienti con gravi malattie epatiche e renali, malattie neoplastiche, immunodepressive.
- Pazienti psicotici e/o con instabilità emotiva.
- Pazienti sottoposti a radioterapia locale.
- Pazienti con grave bruxismo e/o gravi discrepanze cranio-facciali e maxillo-mandibolari.
- Pazienti che abusano di alcool e droghe.
- Pazienti con grave dismetabolismo osseo.
- Fumatori.



Preparazione del paziente

La visita del paziente che si presta ad un intervento di implantologia orale deve comprendere un'analisi dettagliata delle condizioni generali di salute e la valutazione attenta della motivazione e delle aspettative del soggetto.

Note

**“All
or
Nothing,”**



AON

Implants

All or Nothing

AON Implants Srl
Via Alessandro Manzoni, 25
36040 Grisignano di Zocco (VI)
ITALY

info@aonimplants.com
+39 0444 614994

www.aonimplants.it



Inquadra il QR CODE
con il tuo smartphone